

# Aplicaciones Beltone guía del usuario



[Beltone.com](http://Beltone.com)

# Introducción


**Las aplicaciones de Beltone están hechas para mejorar su experiencia auditiva y le permiten obtener más provecho de sus audífonos Beltone.**

La innovadora tecnología auditiva de Beltone, su sonido y diseño, combinado con la programación de dispositivos personalizada por su audioprotesista, hará que oír sea una experiencia más agradable.

Las aplicaciones de Beltone le permiten obtener más provecho de sus audífonos Beltone y le proporcionan nuevos medios para aumentar el control, la personalización y el alivio.

Para más información y ayuda sobre las aplicaciones, visite el sitio web:  
**[www.beltone-hearing.com/apps](http://www.beltone-hearing.com/apps)**


Si desea una versión impresa de la guía del usuario de una aplicación, consulte a nuestro servicio de atención al cliente o, simplemente, imprima esta guía del usuario.

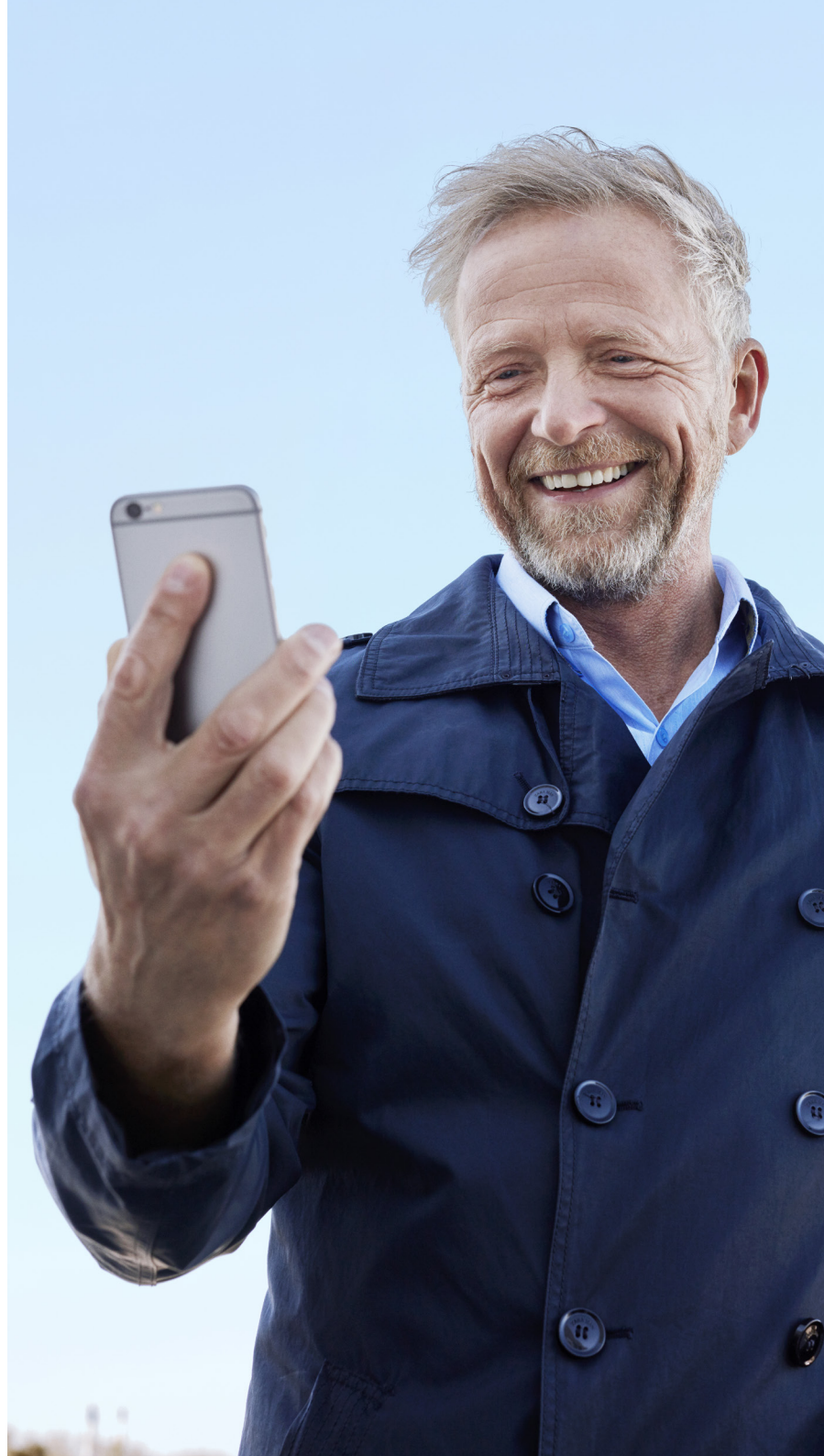

# Búsqueda e instalación de la aplicación




## Acceda a las aplicaciones para iPhone, iPad e iPod touch: descargue desde App Store siguiendo estos pasos:

1. Acceda a App Store pulsando sobre el icono App Store  en los dispositivos iPhone, iPad o iPod touch
2. En App Store, busque "Beltone" y el nombre de la aplicación
3. Si utiliza un iPad, cambie el criterio de búsqueda en la esquina superior izquierda a "solo iPhone"
4. Tras localizar la aplicación, pulse en "Descargar"
5. A continuación, toque "Instalar"
6. Introduzca un Apple ID y la contraseña
7. Tras introducir la contraseña la aplicación Beltone comenzará a descargarse
8. Después de descargar, encontrará la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil: tóquela para abrir la aplicación de Beltone



## Acceda a las aplicaciones para dispositivos Android. Descárguelas desde Google Play siguiendo estos pasos:

1. Entre en Google Play tocando el ícono  de Play Store en su teléfono Android.
2. En Google Play, busque "Beltone" y el nombre de la aplicación
3. Después de encontrar la aplicación, toque "Install" y, a continuación, "Aceptar" para permitir que la aplicación acceda a ciertas funciones de su teléfono, como Bluetooth
4. Tras introducir la contraseña la aplicación Beltone comenzará a descargarse
5. Cuando finalice la instalación, toque "Abrir" para abrir la aplicación Beltone

# Beltone HearMax



La aplicación Beltone HearMax ofrece una facilidad de uso sin precedentes con sólo un toque de dedo. Controle y personalice los ajustes de sus audífonos directamente desde su dispositivo móvil, para que pueda personalizar su audición según los entornos de sonido. Incluso su audioprotesista puede actualizar su audífono y recibir actualizaciones de forma remota sin desplazarse a la clínica (disponible en mercados seleccionados). La aplicación le guiará en todo lo que puede hacer y cómo hacerlo.

La aplicación Beltone HearPlus está disponible en App Store y Google Play.

## Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

### *Audífonos:*

- Audífonos Beltone compatibles con Bluetooth 4.0\*: Beltone Trust™


### *Dispositivos móviles:*

- iPhone, iPad o iPod touch. La aplicación Beltone HearMax también es compatible con Apple Watch.
- Compatibilidad con dispositivos Android.


**Visite nuestro sitio web para obtener información específica y una lista actualizada de dispositivos móviles compatibles:**

**[www.beltone-hearing.com/HearMax](http://www.beltone-hearing.com/HearMax)**

\*Asegúrese de que los audífonos disponen de la última versión de firmware. Si no es así, su audioprotesista puede actualizar el firmware del audífono.

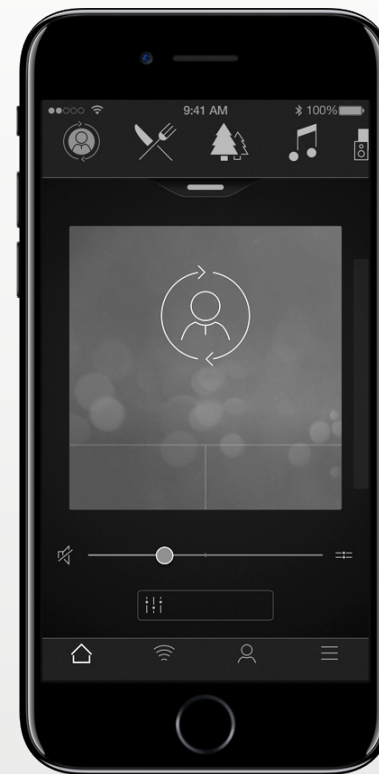


# Funciones de la aplicación Beltone HearMax™

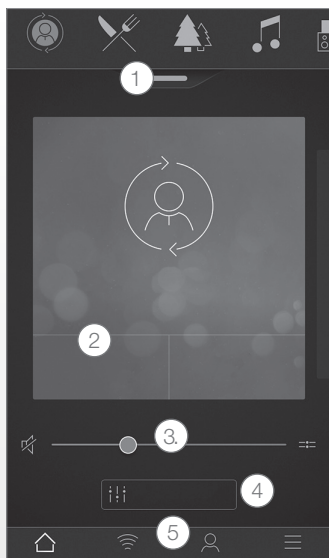

\*Disponible para Beltone Trust 17.  
\*\*Disponible para Beltone Trust si la función Tinnitus Breaker Pro ha sido activada por su audioprotesista.


Pantalla principal:

1. Usar el carrusel superior, el **desplegable** o pasar la tarjeta para elegir su audífono, programa de transmisión o Favorito. Pulsar el desplegable para modificar programas y Favoritos.
2. Usar los **botones de acceso rápido** para acceder a los ajustes de sonido avanzados con un toque.
3. Ajustar el **volumen** o silenciar.
4. Acceder a **Sound Enhancer** para ajustar agudos, medios y bajos, reducir el ruido, enfocar la voz o reducir el ruido del viento\*. También tiene acceso a Tinnitus Manager para ajustar el tono y la variación del sonido de Tinnitus Breaker Pro, o para elegir su Nature Sound\*\*.
5. **Menú de navegación.**

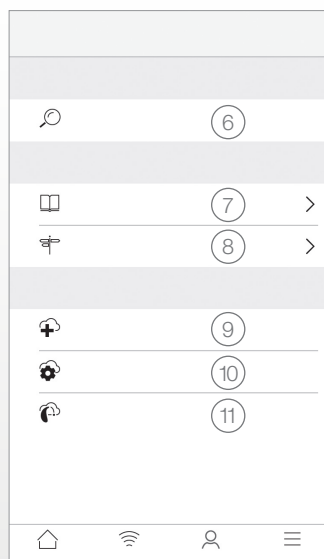

Menú "Mi":

6. Buscar **un audífono extraviado**.
7. **Conocer la aplicación** y sus funciones.
8. **Sugerencias** para el uso de la aplicación y los audífonos
9. **Solicitar ayuda** con la configuración y los programas de los audífonos a su audioprotesista.
10. Consultar **el estado de sus solicitudes e instalar cualquier configuración** y actualizaciones del programa enviados por su audioprotesista. Volver a la configuración anterior.
11. **Instalar el software nuevo** recibido en los audífonos.

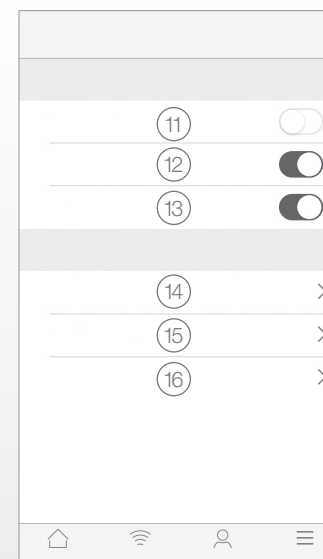

Más menú:

11. Entrar/salir **del modo de demostración**.
12. Activar/desactivar **las sugerencias**.
13. Activar/desactivar **la activación automática de las ubicaciones Favoritas**.
14. **Acerca de:** Información sobre la aplicación y la marca.
15. **Información legal:** Información sobre el fabricante, los términos y las condiciones, y la política de privacidad. Revisar, dar o retirar el consentimiento para el procesamiento de datos.
16. **Asistencia:** Más ayuda de la aplicación y enlaces adicionales de ayuda en la web y preguntas frecuentes.

## Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los que las aplicaciones han sido desarrolladas.

CE  
0297

Beltone A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.

# Aplicación Beltone HearPlus™



La aplicación Beltone HearPlus pone al alcance de la punta de los dedos del usuario tanto los controles básicos como las prestaciones más avanzadas, para que pueda personalizar su experiencia personal de audición.

La aplicación Beltone HearPlus es la primera aplicación para audífonos con una conexión directa entre los audífonos y el teléfono móvil.

La aplicación Beltone HearPlus está disponible en App Store y Google Play.

## Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

### *Audífonos:*

- Audífonos Beltone compatibles con Bluetooth 4.0 \*: Beltone Legend, Beltone First, Beltone Boost y Beltone Boost Plus.



### *Dispositivos móviles:*

- iPhone, iPad o iPod touch. La aplicación Beltone HearPlus también es compatible con Apple Watch.
- Compatibilidad con dispositivos Android.

Visite nuestro sitio web para obtener información específica y una lista actualizada de los dispositivos móviles compatibles:


**[www.beltone-hearing.com/hearplus](http://www.beltone-hearing.com/hearplus)**

\*Asegúrese de que los audífonos disponen de la última versión de firmware. Si no es así, su audioprotesista también puede actualizar el firmware del audífono.

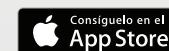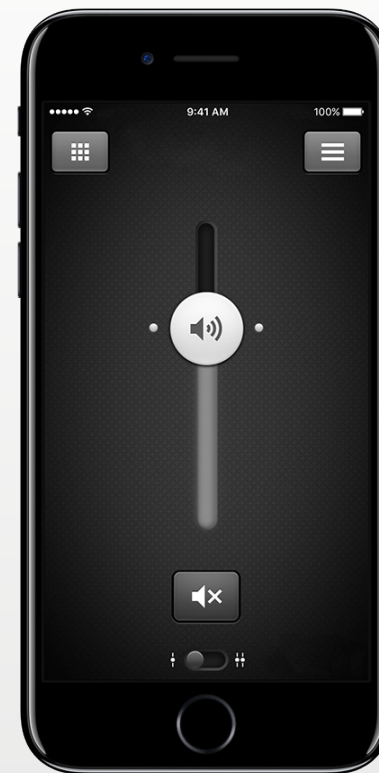




# Funciones de la aplicación Beltone HearPlus™

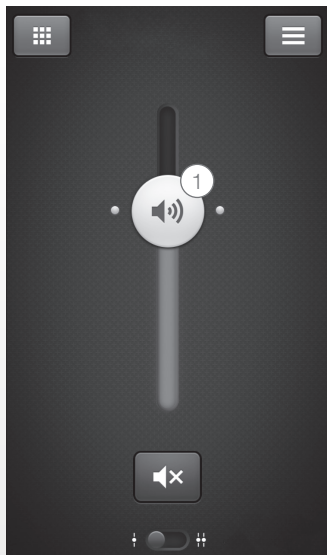

1. Ajustar y silenciar el **volumen** de ambos audífonos o independientemente para cada audífono.

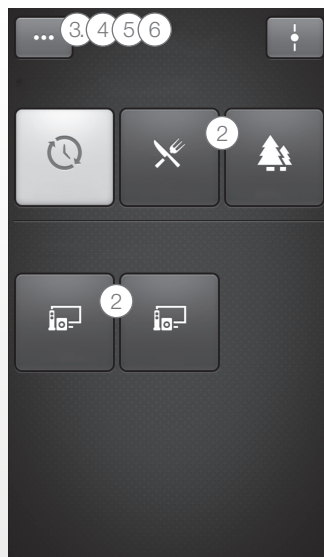

2. Cambiar programas manuales y del **transmisor**.

3. Ajustar **agudos y bajos** a sus preferencias.

4. Crear **Favoritos** para guardar los programas y ajustes como favoritos. Asociar un Favorito con una ubicación específica.


5. Use **el Realce de sonidos** para realizar ajustes de funciones avanzadas: Comodidad cuando hay ruido, centrarse en el habla y comodidad cuando hay viento\*.

6. Use **Tinnitus Manager** para ajustar el tono y la variación del sonido de Tinnitus Breaker Pro\*\*.

Use Tinnitus Manager para seleccionar su sonido Nature Sound™ preferido\*\*.

\* Disponible para Beltone Legend 17 y Beltone Boost Plus 17.

\*\*Disponible para Legend y Boost Plus si la función Tinnitus Breaker Pro ha sido activada por su audioprotesista.

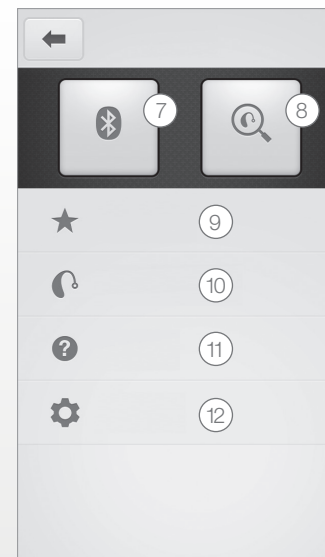

7. **Conexión** Ver el estado de las pilas y la conexión.

8. **Buscador**: permite localizar audífonos extraviados.

9. **Favoritos**: Permite ver un resumen, modificar o eliminar los Favoritos guardados.

10. **Mi audífono**: Obtenga más inspiración e información personalizada acerca de los audífonos.

11. **Tutorial**: El tutorial de la aplicación le guía a través de las funciones de la aplicación.

12. **Ajustes**: Modificar y personalizar nombres de programas, eliminar todos los favoritos, entrar y salir del modo de demostración y ver información sobre la aplicación.

## Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los que las aplicaciones han sido desarrolladas.

CE  
0297

Beltone A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.

# Aplicación Beltone SmartRemote



La aplicación Beltone SmartRemote permite controlar los audífonos. Junto con Beltone Direct Phone Link 2, Beltone SmartRemote le permite utilizar su dispositivo móvil para obtener fácilmente una visión general y controlar a distancia los audífonos inalámbricos Beltone y los accesorios inalámbricos Beltone Direct Line.

La aplicación Beltone SmartRemote está disponible en App Store y Google Play.

## Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

### *Audífonos:*

- Audífonos inalámbricos Beltone.

### *Accesorio inalámbrico:*

- Manos Libres Beltone Direct Phone Link 2.

### *Dispositivos móviles:*

- iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.
- Dispositivos Android\* con Android OS 2.3.5 o posterior.

Para obtener el mejor rendimiento, la aplicación Beltone SmartRemote no debe utilizarse activamente en más de un dispositivo móvil a la vez.

## Para más información, visite


[www.beltone-hearing.com/smartremoteapp](http://www.beltone-hearing.com/smartremoteapp)



\*Funcionalidad comprobada en modelos seleccionados de HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung y Sony.




# Funciones de la aplicación Beltone SmartRemote™

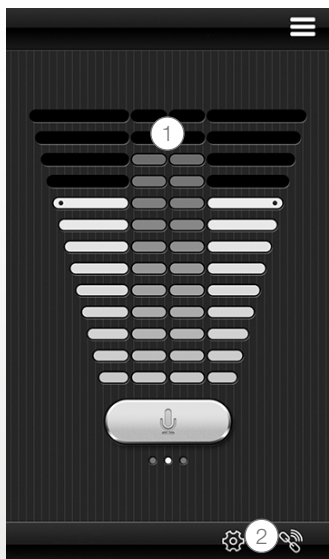

1. **Ajustar o silenciar el** volumen en los audífonos inalámbricos. Ajustar o silenciar el volumen de los accesorios inalámbricos.

2. Pantalla de enlace **para ver** las conexiones entre la aplicación y los audífonos.

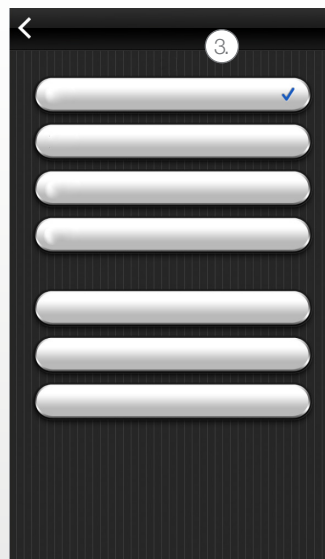

3. **Cambiar programas manuales y del transmisor.**

## Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los que las aplicaciones han sido desarrolladas.

CE  
0297

Beltone A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.

# Aplicación Beltone Tinnitus Calmer



La aplicación Beltone Tinnitus Calmer ofrece un tratamiento equilibrado y flexible del tinnitus. Utiliza una combinación de sonidos y ejercicios relajantes destinados a distraer su cerebro de centrarse en el tinnitus. Con el tiempo, el cerebro aprende a centrarse menos en el tinnitus. Además, hay siete capacidades para ampliar los elementos de asesoramiento y terapia de la aplicación, proporcionando consejos atractivos para el tratamiento y la comprensión del tinnitus.

La aplicación es una herramienta para cualquier persona con tinnitus. Debe utilizarse en combinación con un programa o un plan de tratamiento del tinnitus establecido por un especialista.

La aplicación Beltone Tinnitus Calmer está disponible en App Store y Google Play.

## Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

### *Audífonos:*

- Audífonos Beltone Bluetooth 4.0 para la transmisión directa desde iPhone, iPad o iPod touch, o audífonos inalámbricos Beltone con el accesorio Direct Phone Link 2 para la transmisión directa de audio a dispositivos Android.

### *Dispositivos móviles:*

- iPhone, iPad o iPod touch.
- Dispositivos Android con Android OS 4.1 o posterior.


### *Auricular:*

- También puede usar la aplicación con un auricular estándar conectado al teléfono.


Para más información, visite: [www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer](http://www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer)



# Funciones de la aplicación Beltone Tinnitus Calmer™

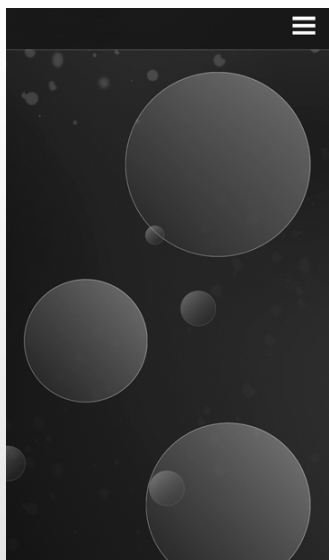

La aplicación le permite administrar su biblioteca personal de archivos de terapia y crear sus propios paisajes sonoros, desde sonidos ambientales a piezas musicales breves.

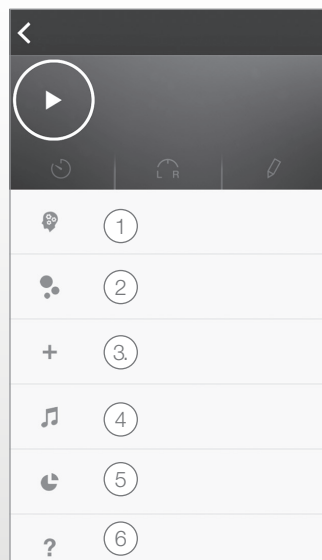

1. **Cómo hacer frente a su tinnitus:** Siete capacidades para tratar su tinnitus.

2. **Descargas:** Descargar sonidos nuevos.

3. Crear **un paisaje sonoro.**

4. **Biblioteca de sonidos:** Archivos de música.

5. **Mi uso:** Analiza el uso de la aplicación, para que pueda ver qué sonidos funcionan mejor con usted.

6. **Sugerencias útiles.**

## Uso previsto de la aplicación:

La aplicación está destinada a proporcionar terapia de sonido y ejercicios de relajación con objeto de distraer a un paciente de tinnitus de centrarse en el tinnitus. Se puede utilizar como parte de un plan de tratamiento del tinnitus. No está concebido para su uso en un tratamiento audiológico u oncológico del tinnitus sintomático ni para enmascarar ruidos internos.



## Advertencia sobre el Tinnitus

Para evitar posibles pérdidas auditivas, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.



Beltone A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S.

# Advertencias y precauciones

## uso con aplicaciones para dispositivos móviles:



Las notificaciones sobre actualizaciones de las aplicaciones no deben desactivarse y se recomienda instalar todas las actualizaciones para que la aplicación funcione correctamente y se mantenga al día.

La aplicación sólo debe utilizarse con los equipos Beltone para los que está diseñada. Beltone no se hace responsable si la aplicación se utiliza con otros dispositivos.

## Advertencias y precauciones:

si utiliza la aplicación Beltone con el audífono, asegúrese de leer la guía del usuario del audífono. La guía del usuario del audífono se incluyó en el paquete de los audífonos. Si necesita una copia nueva, consulte con el servicio de atención al cliente de Beltone.

Preste atención a la información que contenga un símbolo de advertencia

 **ADVERTENCIA** indica una situación que podría causar lesiones de gravedad,  
 **PRECAUCIÓN** indica una situación que podría provocar lesiones leves y moderadas.



# Beltone, ayudamos al mundo a oír mejor

Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un amigo a disfrutar más de la vida. Desde 1940, hemos proporcionado conocimiento, herramientas, servicios y formación a profesionales del cuidado de personas con problemas auditivos. Beltone pone los cuidados auditivos de calidad al alcance de más personas. Para ello, desarrollamos soluciones auditivas técnicamente óptimas sin dejar de enfocarnos en las necesidades individuales. Estamos convencidos de que no se le debería negar a ninguna persona la posibilidad de mejorar su vida a través de una mejor audición.

## FABRICANTE

Beltone A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Dinamarca  
Tel.: +34 91 428 22 20  
beltone-hearing.com  
Nº CVR 55082715

© 2017 GN Hearing Care Corporation. Todos los derechos reservados. Beltone es una marca comercial de GN Hearing Care Corporation. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales registradas de Google Inc. El robot de Android se reproduce y modifica de forma compartida con Google y se utiliza de acuerdo con los términos descritos en la licencia Creative Commons Attribution 3.0. La marca de la palabra Bluetooth y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

