

Beltone apps Brugsanvisning



Introduktion

Beltone apps er lavet til at forbedre din høreoplevelse og give dig mulighed for at få mere ud af dine Beltone høreapparater.


Beltones innovative lydteknologi og design, kombineret med de tilpassede programmer valgt af din høreapparatspecialist, vil gøre høreelse til en mere behagelig oplevelse.

Beltone apps lader dig få mere ud af dine Beltone høreapparater ved at stille nye måder at opnå kontrol, personlig tilpasning og lindring til rådighed.

Du kan få flere oplysninger og hjælp til vores apps på webstedet:

www.beltone-hearing.com/apps

Hvis du gerne vil have en trykt udgave af appens brugervejledning, bedes du kontakte kundesupport eller blot udskrive denne brugervejledning.

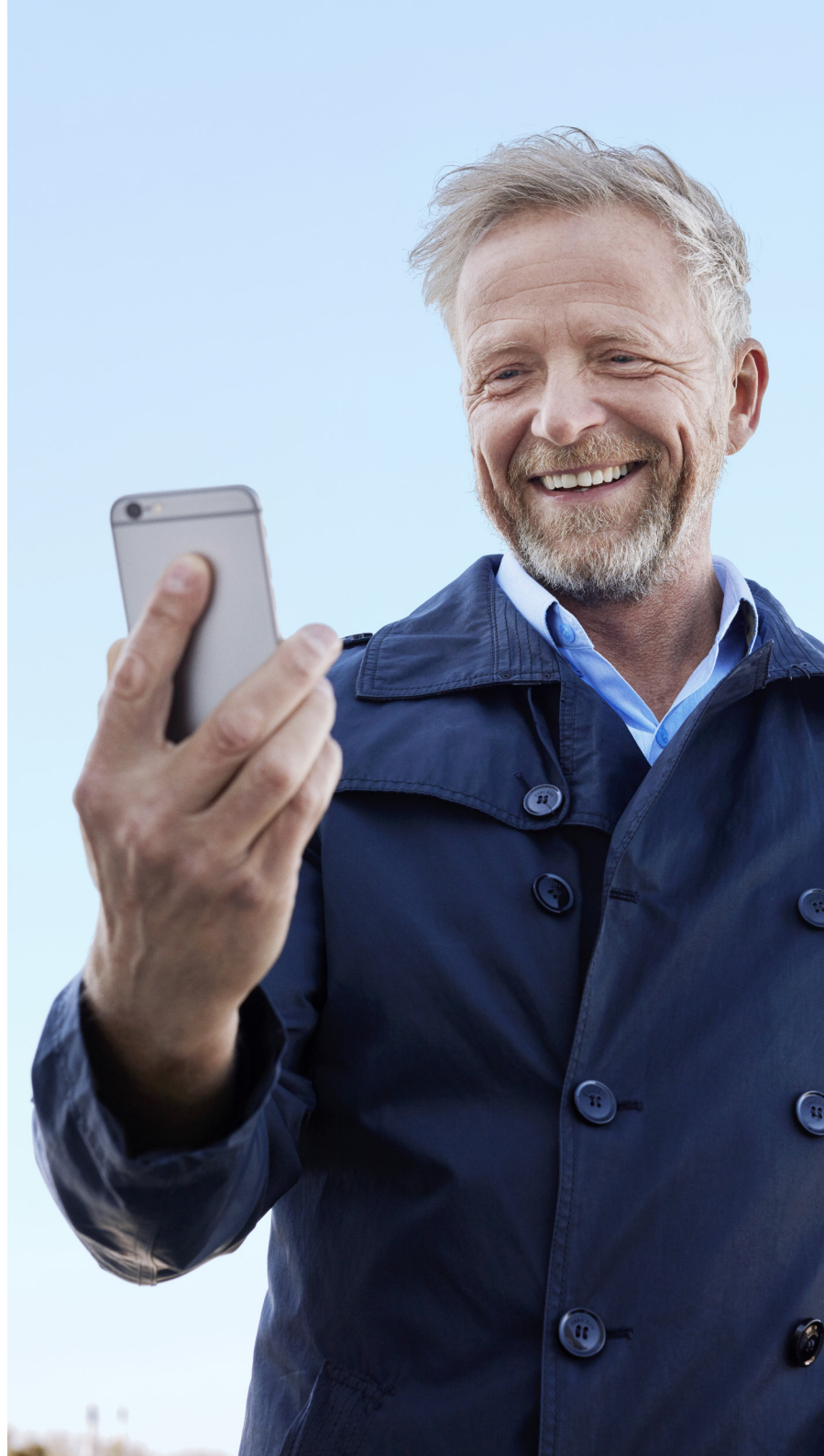

Finde og installere appen



Adgang til apps for iPhone, iPad og iPod touch – download fra App Store ved at følge disse trin:

1. Åbn App Store ved at trykke på App Store ikonet  på en iPhone, iPad eller iPod touch
2. Søg efter "Beltone" og navnet på appen i App Store
3. Hvis du bruger en iPad, skal du ændre søgekriteriet i øverste venstre hjørne til "kun iPhone"
4. Når du har fundet appen, skal du trykke på "Hent"
5. Tryk derefter på "Installer"
6. Indtast dit Apple ID og din adgangskode
7. Når du har indtastet adgangskoden, vil Beltone appen blive downloadet og installeret
8. Når du har downloadet appen, kan du finde den på mobilenhedens skærm - tryk på den for at åbne Beltone appen



Adgang til apps for Android-enheder – download fra Google Play ved at følge disse trin:

1. Gå ind i Google Play ved at trykke på Play Store ikonet  på din Android-telefon.
2. Søg efter "Beltone" og navnet på appen i Google Play
3. Når du har fundet appen, skal du trykke på "Installer" og derefter "Accepter" for at tillade, at appen får adgang til bestemte funktioner på din telefon såsom Bluetooth
4. Når du har indtastet adgangskoden, vil Beltone appen blive downloadet og installeret
5. Når installationen er færdig, skal du trykke på "Åbn" for at åbne Beltone appen

Beltone HearMax



Beltone HearMax appen tilbyder uovertruffen brugervenlighed med et enkelt tryk med en finger. Kontrollér og brugertilpas dine høreapparatindstillinger direkte fra din mobilenhed og tilpas din høreapparatoplevelse, så den passer til dit lydmiljø. Du kan endda få dine høreapparatprogrammer opdateret af din høreapparatspecialist og modtage eksterne høreapparatopdateringer uden at skulle møde op på klinikken (kun på udvalgte markeder). Appen vil vejlede dig om alle de ting, du kan gøre, og hvordan du gør dem.

Beltone HearMax appen kan hentes i App Store og Google Play.

Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:

Høreapparater:

- Beltone høreapparater med Bluetooth 4.0*: Beltone Trust™ eller nyere.


Mobilenheder:

- iPhone, iPad eller iPod touch. Beltone HearMax appen er også kompatibel med with Apple Watch.
- Understøttede Android-enheder.


Gå ind på vores websted for at se specifikke kompatibilitetsoplysninger og en opdateret liste over kompatible mobilenheder:

www.beltone-hearing.com/compatibility

*Sørg for at høreapparaterne er opdateret til den nyeste firmware-version. Ellers kan din høreapparatspecialist opdatere høreapparaternes firmware for dig.

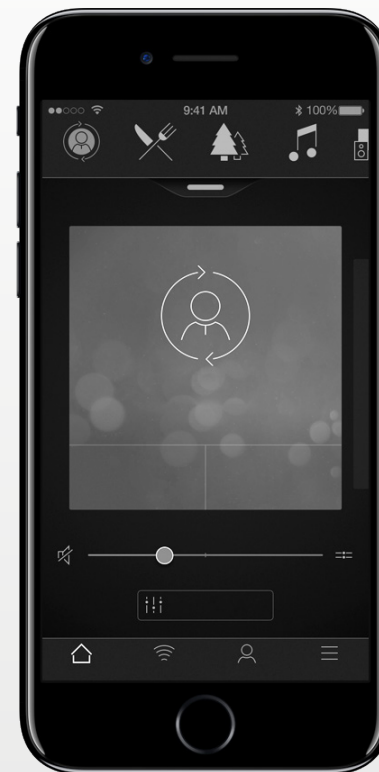

Beltone HearMax™ appens funktionalitet

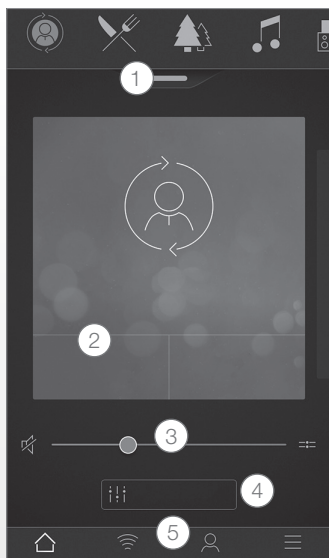


*Fås til Beltone Trust 17 og Beltone Boost Max 17.

**Fås hvis funktionen Tinnitus Breaker Pro er blevet aktiveret af din høreapparatspecialist.


Startskærm:

1. Brug den øverste karrusel, **rullemenu** eller kort-stryg til at vælge dit høreapparat eller streamingprogram eller din favorit. Tryk på rullemenuen til at redigere programmer og favoritter.
2. Brug **hurtigknapperne** til avancerede lydjusteringer med et enkelt tryk.
3. Indstil **lydstyrke** eller slå lyd fra.
4. Åbn **Lydforbedring** for at justere diskant/mid/bas, støjrreduktion, talefokus eller reduktion af vindstøj*. Du kan også få adgang til Tinnitus Manager for at justere toneleje og lydvariation fra Tinnitus Breaker Pro, eller for at vælge din Nature Sound**.
5. **Navigationsmenu.**

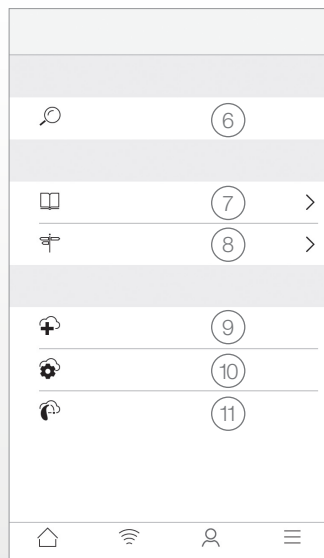

'Min' menu:

6. Find dit **mistede høreapparat**.
7. **Lær om appen** og dens funktioner.
8. **Vejledende råd** om brug af appen og høreapparaterne
9. **Anmod om hjælp** til dine høreapparatindstillinger og -programmer fra din høreapparatspecialist.
10. Se **statussen for dine anmodninger og installér eventuelle indstillings-** og programopdateringer, som din høreapparatspecialist har sendt til dig. Gå tilbage til tidligere indstillinger.
11. **Installér ny software** modtaget til dine høreapparater.

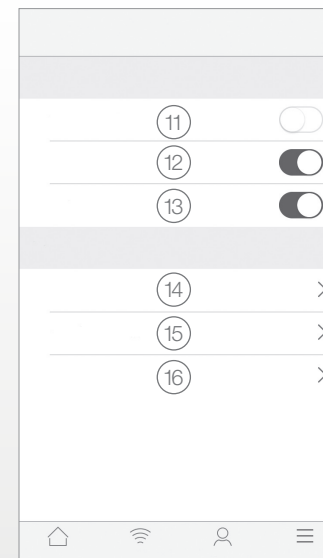

Mere menu:

11. Åbn/luk **Demo-tilstand**.
12. Slå **Vejledende tips til/fra**.
13. Slå **Automatisk aktivering af favoritsteder til/fra**.
14. **Om:** Læs om appen og brandet.
15. **Juridiske oplysninger:** Lær om producenten, vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik. Gennemgå, giv eller tilbagetræk samtykke til databehandling.
16. **Support:** Mere hjælp til appen og yderligere links til webbaseret hjælp og OSS.

Tilsigtet brug af apps til mobilenheder:

Apps til mobilenheder kan benyttes sammen med trådløse høreapparater. Apps på mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som de pågældende apps er blevet udviklet til. Beltone

CE
0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

Alle forespørgsler vedrørende EU's medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

Beltone HearPlus™ app



Beltone HearPlus appen gør, at du har grundlæggende betjening samt mere avancerede funktioner lige ved hånden, så du nemt kan tilpasse din personlige høreoplevelse.

Beltone HearPlus appen er den første app med en direkte forbindelse mellem dine høreapparater og mobiltelefon.

Beltone HearPlus appen kan hentes i App Store og Google Play.

Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:

Høreapparater:

- Beltone høreapparater med Bluetooth 4.0*: Beltone Legend, Beltone First, Beltone Boost og Beltone Boost Plus.


Mobilenheder:

- iPhone, iPad eller iPod touch. Beltone HearPlus appen er også kompatibel med with Apple Watch.
- Understøttede Android-enheder.


Gå ind på vores websted for at se specifikke kompatibilitetsoplysninger og en opdateret liste over kompatible mobilenheder:

www.beltone-hearing.com/compatibility


* Sørg for at høreapparaterne er opdateret til den nyeste firmware-version. Ellers kan din høreapparatspecialist opdatere høreapparaternes firmware for dig.

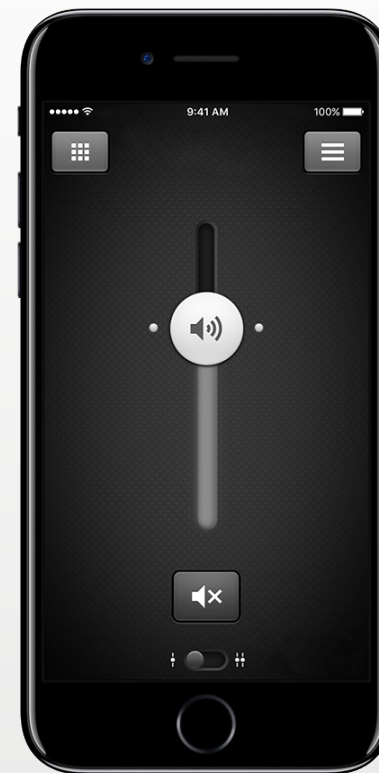

Beltone HearPlus™ appens funktionalitet

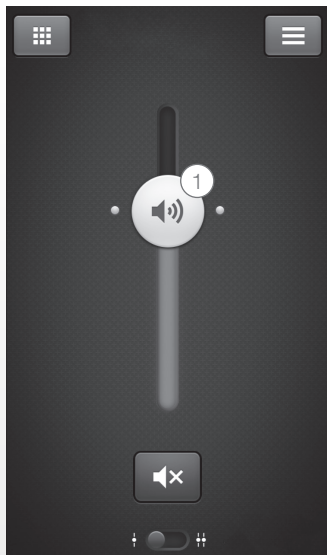

1. Indstil og slå **lyden fra** på begge høreapparater eller på hvert høreapparat for sig.

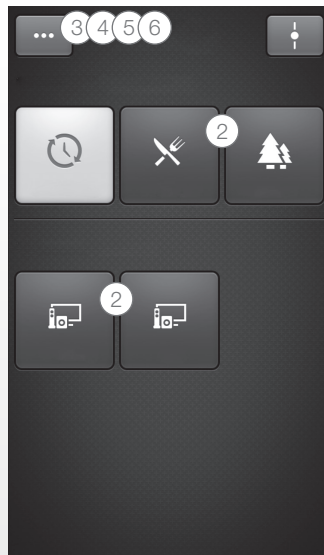

*Tilgængelig til Beltone Legend 17 og Beltone Boost Plus 17.

**Fås til Legend og Boost Plus hvis Tinnitus Breaker Pro er blevet aktiveret af din høreapparatspecialist.

2. Skift manuelle og streamningsprogrammer.


3. Indstil **diskant og bas** til dine præferencer.

4. Opret **favoritter** til at gemme dine foretrukne programmer og indstillinger. Tilknyt en favorit til et bestemt sted.

5. Brug **Sound enhancer** til avancerede funktioner såsom: Komfort i støj, Talekomfort og Komfort i vind*.

6. Brug **Tinnitus Manager** til at justere toneleje og lydvariation fra funktionen Tinnitus Breaker Pro**.

Brug Tinnitus manager til at vælge din foretrukne Nature sound™**.

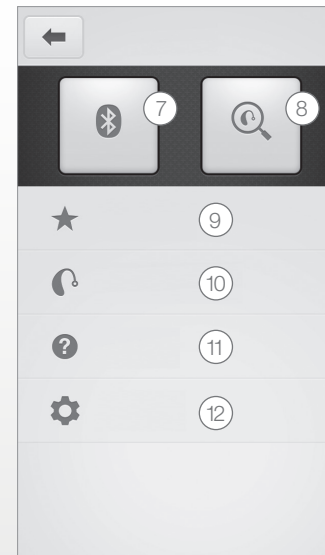

7. **Tilslutning:**Se batteri- og forbindelsesstatus.

8. **Finder:**Hjælper dig med at finde mistede eller forlagte høreapparater.

9. **Favoritter:**Se en oversigt over eller rediger eller slet gemte favoritter.

10. **Mit høreapparat:**Find personaliseret information om høreapparater.

11. **Selvstudium:**Selvstudier i appen tager dig med gennem appens funktioner.

12. **Indstillinger:**Rediger og personaliser programnavne, slet alle favoritter, åbn og luk demo-tilstand og se baggrundsoplysninger om appen.

Tilsigtet brug af apps til mobilenheder:

Apps til mobilenheder kan benyttes sammen med trådløse høreapparater. Apps på mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som de pågældende apps er blevet udviklet til.

CE
0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

Alle forespørgsler vedrørende EU's medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

www.beltone-hearing.com/smartremoteapp



Beltone SmartRemote appen giver din kontrol over dine høreapparater. Brugt sammen med Beltone Direct Phone Link 2 lader Beltone SmartRemote dig bruge din mobilenhed til nemt at få en oversigt over og fjernstyre dine Beltone trådløse høreapparater og dit Beltone trådløse tilbehør.

Beltone SmartRemote appen kan hentes i App Store og Google Play.

Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:

Høreapparater:

- Beltone trådløse høreapparater.

Trådløst tilbehør:

- Beltone Direct telefonlink 2.

Mobilenheder:

- iPhone, iPad eller iPod touch der kører iOS 7 eller nyere.
- Android-enheder* der kører Android OS 2.3.5 eller nyere.

For at opnå den bedste ydelse, bør Beltone SmartRemote appen ikke bruges aktivt på mere end én mobilenhed ad gangen.


For yderligere oplysninger, se

www.beltone-hearing.com/smartremoteapp




*Funktionalitet er kun kontrolleret på udvalgte modeller fra HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung og Sony.

Beltone SmartRemote™ appens funktionalitet

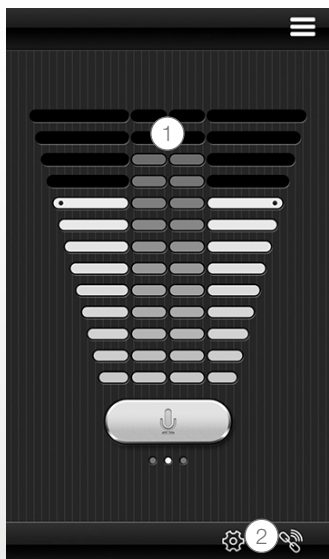

1. **Indstiller lydstyrke** eller slår lyden fra på dine trådløse høreapparater. Indstiller lydstyrke eller slår lyden fra på dit trådløse tilbehør.

2. Brug den særlige **link-skærm** til at få et overblik over forbindelser mellem appen og dine høreapparater.

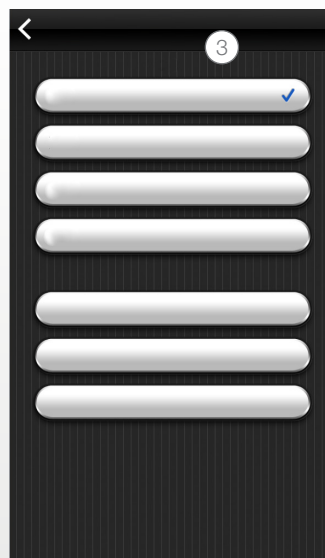

3. **Skift manuelle og streamningsprogrammer.**

Tilsigtet brug af apps til mobilenheder:

Apps til mobilenheder kan benyttes sammen med trådløse høreapparater. Apps på mobilenheder sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via de mobilenheder, som de pågældende apps er blevet udviklet til.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

Alle forespørgsler vedrørende EU's medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

Beltone Tinnitus Calmer app



Beltone Tinnitus Calmer appen tilbyder balanceret og fleksibel tinnitus-styring. Den bruger en kombination af lyde og afslappende øvelser, der er beregnet til at distrahere din hjerne fra at fokusere på din tinnitus. Over tid lærer hjernen at fokusere mindre på tinnitus. I tillæg udvider syv færdigheder til håndtering appens rådgivnings- og terapielementer, der giver engagerende råd om håndtering og forståelse af tinnitus.

Appen er et værktøj til alle med tinnitus. Den skal bruges sammen med et tinnitus-håndteringsprogram udarbejdet af en høreapparatspecialist.

Beltone Tinnitus Calmer appen kan hentes i App Store og Google Play.

Du skal bruge følgende enheder for at bruge appen:

Høreapparater:

- Beltone høreapparater med Bluetooth 4.0 til direkte streaming til høreapparater fra en iPhone, iPad eller iPod touch eller Beltone høreapparater med trådløs funktion sammen med Direct Telefon Link 2 tilbehør til direkte lydstreaming på Android-enheder.

Mobilenheder:

- iPhone, iPad eller iPod touch.
- Android-enheder der kører Android OS 4.1 eller nyere.

Headset:

- Du kan også anvende appen med en almindelig hovedtelefon forbundet til telefonen.


Du kan få flere oplysninger på www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer



Beltone Tinnitus Calmer™ appens funktionalitet



Appen lader dig håndtere dit personlige bibliotek med lydterapifiler og lader dig oprette dine egne lydbilleder fra omgivende lyde og korte musikstykker.

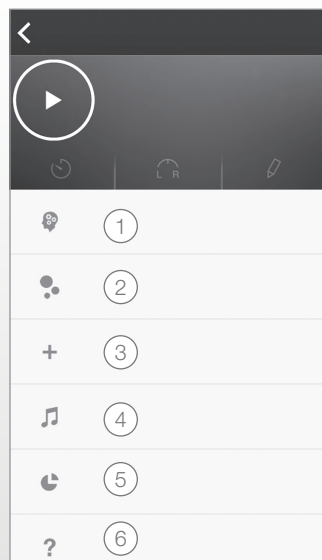

1. **Håndtering af din tinnitus:**Syv færdigheder til at håndtere din tinnitus.

2. **Downloads:**Download nye lyde.

3. Opret **nyt lydbillede**

4. **Lydbibliotek:**Musikfiler.

5. **Min brug:**Spor brug af appen, så du kan se, hvilken lyd fungerer bedst for dig.

6. **Nyttige råd.**

Tilsigtet brug af appen:

Appen er beregnet til at give lydterapi og afslappende øvelser med det formål at distrahere en tinnituspatient fra at fokusere på tinnitus. Den kan bruges som en del af en tinnitus-håndteringsplan. Den er ikke beregnet til brug i audiologisk/ontologisk behandling af symptomatisk tinnitus eller til at maskere indvendig støj.



Tinnitus-advarsel

Undgå at lytte ved høj lydstyrke i for lang tid ad gangen for at forebygge et muligt høretab.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark

Alle forespørgsler vedrørende EU's medicinske direktiv 93/42/EØF skal rettes til Beltone A/S.

Advarsler og forholdsregler

Brug med apps til mobilenheder:

Meddelelser om app-opdateringer må ikke deaktiveres, og det anbefales, at brugeren installerer alle opdateringer for at sikre, at appen fungerer korrekt og holdes opdateret.


Appen må kun benyttes sammen med de Beltone apparater, den er beregnet til, og Beltone påtager sig intet ansvar, hvis appen benyttes sammen med andre apparater.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Hvis du bruger Beltone appen med høreapparatet, skal du sørge for at have læst høreapparatets brugervejledning. Høreapparatets brugervejledning fulgte med i høreapparatets æske. Hvis du har brug for en ny kopi, skal du kontakte Beltone kundesupport.

Vær opmærksom på oplysninger markeret med advarselssymbolet

 **ADVARSEL** angiver en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser, **FORSIGTIG** angiver en situation, der kan føre til mindre til moderate skader.

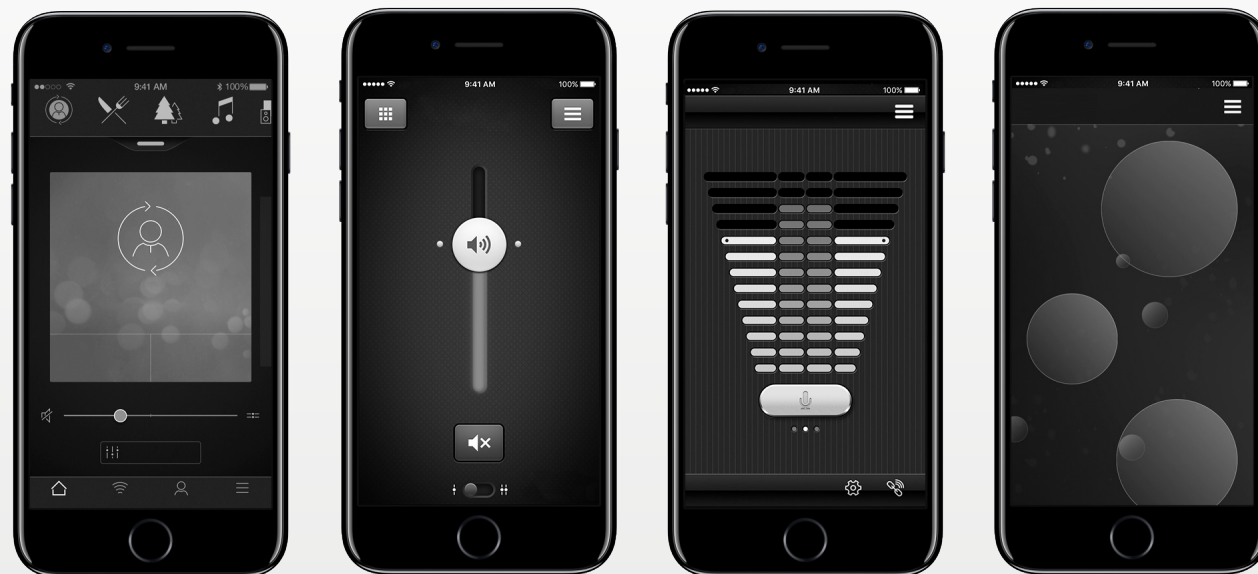

Beltone. Hjælper verden med at høre bedre

Beltone er et resultat af bestræbelserne på at hjælpe en ven med at få det bedste ud af livet. Vi har siden 1940 leveret viden, værktøjer, serviceydelser og uddannelse til høreapparatspecialister, der hjælper mennesker med høretab. Beltone gør det muligt for endnu flere mennesker med høretab at få adgang til kvalitetsløsninger. Vores fornemste opgave er at udvikle de bedst mulige løsninger – uden nogensinde at miste fokus på den enkeltes behov. Det er vores overbevisning, at ingen skal nægtes adgang til muligheden for et forbedret liv med bedre hørelse.

INTERNATIONALT HOVEDKONTOR

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
beltone-hearing.com
CVR no. 55082715

KUNDESERVICE OG REPARATION

GN Hearing Danmark A/S
(GN ReSound A/S)
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Tlf.: 45 75 22 22
gnhearing.dk

© 2017 GN Hearing Care Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Beltone er et varemærke tilhørende GN Hearing Care Corporation. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. Android-robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde oprettet og delt af Google, og anvendes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3,0 Attribution License. Bluetooth ordmærket og logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

