

Beltone'i rakenduste kasutusjuhend



Beltone.com

Sissejuhatus

Beltone'i rakendused on loodud eesmärgiga anda teile paremad võimalused kuulmiseks ja maksimaalse kasu saamiseks Beltone'i kuulmisabivahenditest.

Kuulmine saab olema igati nauditav tänu Beltone'i innovatiivsele helitehnoloogiale ja disainile ning teie kuulmisspetsialisti poolt tehtavale seadmete häälestamisele.

Beltone'i rakendused aitavad teil saada rohkem kasu teie Beltone'i kuulmisabivahenditest. Rakendused annavad teile uued võimalused seadmetest kasu saamiseks, nende personaliseerimiseks ja kuulumiskaebuste leevendamiseks.

Lisateabe ja rakendustega seotud abi saamiseks külastage veebilehte
www.beltone-hearing.com/hearplus

Kui soovite saada rakenduse kasutajajuhendi trükitud versiooni, võtke ühendust klienditoega või lihtsalt printige käesolev juhend.



Rakenduse leidmine ja installimine



iPhone'i, iPad'i ja iPod touch'i rakendused on saadaval App Store'is – laadige rakendus alla App Store'ist järgmisi samme järgides:

1. App Store'i sisenemiseks puudutage selle ikooni  oma iPhone'is, iPad'is või iPod touch'is.
2. Sisestage App Store'i otsingusse „Beltone“ ja rakenduse nimi.
3. Kui te kasutate iPad'i, siis muutke otsingukriteeriume ülemises vasakus nurgas, valides „iPad only“ [vaid iPad].
4. Kui olete rakenduse leidnud, puudutage nuppu „Get“ [vali].
5. Siis puudutage nuppu „Install“ [installi].
6. Sisestage kehtiv Apple ID-tunnus ja salasõna.
7. Pärast salasõna sisestamist laaditakse Beltone'i rakendus teie seadmesse, kus see ka installitakse.
8. Pärast alla laadimist leiate rakenduse oma mobiilseadme ekraanilt – puudutage selle ikooni rakenduse avamiseks.



Androidi seadmete jaoks on rakendus saadaval Google Play's – laadige rakendus alla Google Play'ist järgmisi samme järgides:

1. Google Play'sse sisenemiseks puudutage selle ikooni  oma Androidi seadmes.
2. Sisestage Google Play otsingusse „Beltone“ ja rakenduse nimi.
3. Pärast rakenduse leidmist puudutage nuppu „Install“ [installi] ja seejärel nuppu „Accept“ [nõustu], et rakendus saaks kasutada teie seadme teatud omadusi, nagu Bluetooth.
4. Pärast salasõna sisestamist laaditakse Beltone'i rakendus teie seadmesse, kus see ka installitakse.
5. Kui alla laadimine on lõppenud, puudutage nuppu „Open“ [ava], et avada Beltone'i rakendus

Beltone HearMax



Rakendus Beltone HearMax pakub täiesti uuel tasemel kasutamislihtsust – kasutamiseks on vaja vaid üht sõrme puudutust. Juhtige ja häälestage oma kuulmisabivahendi seadeid otse oma mobiilseadmest, et kohandada oma kuulmine ümbritsevale helikeskkonnale vastavaks. Te saate lasta oma kuulmisspetsialistil uuendada oma kuulmisabiprogramme ning saada uuendusi kaugühenduse teel, ilma et oleks vaja kliinikusse kohale minna (saadaval valitud turgudel). Rakendus juhendab teid ja aitab teil mõista, mida kõike te saate häälestada ja kuidas.

Rakendus Beltone HearMax on saadaval App Store'is ja Google Play's.

Rakenduse kasutamiseks on teil vaja järgmisi seadmeid:

Kuulmisabivahendid:

- Beltone Bluetooth 4.0-suutlikkusega kuulmisabivahendid* või hiljem vabaneb.

Mobiilseadmed:

- iPhone, iPad või iPod touch. Rakendus Beltone HearMax ühildub ka Apple Watch'iga.
- Vajaliku toega Androidi seadmed.


Külastage meie veebisaiti täpsema teabe saamiseks ühilduvuse ja ühilduvate mobiilseadmete uuendatud loetelu kohta

www.beltone-hearing.com/compatibility

*Veenduge, et teie kuulmisabivahendite tarkvara on uuendatud ja et teil on kõige uuem püsivara versioon. Teie kuulmisspetsialist võib uuendada teie abivahendi püsivara.



Beltone HearMax™ rakenduse funktsioonid

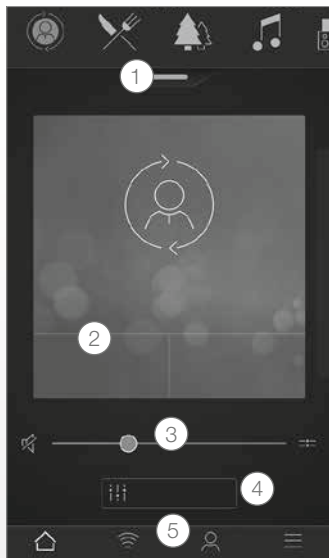


*Saadaval Beltone Trust 17 jaoks ja Beltone Boost Max 17.

**Saadaval Beltone Trust'i jaoks, kui Tinnitus Breaker Pro omadus on sisse lülitatud teie kuulmisspetsialisti poolt.


Põhiekraan:

1. Kasutage ülemist valikuratast, **hüpikmenüüd** või viibet, et valida oma kuulmisabivahend või voogedastusprogramm või oma lemmikud. Puudutage hüpikmenüüd, et kohandada programme või lemmikuid.
 2. Täiendavate heliseadistuste tegemiseks puudutage **kiirnuppe** üks kord.
 3. Muutke **helitugevust** või lülitage heli välja.
 4. Juurdepääs **heli parandajale**, et kohandada kõrgete/keskmiste/bassitoonide kuulumist, vähendada müra, keskenduda kõnele või vähendada tuulemüra kuulumist*.
 5. Juurdepääs ka tinnituse (kõrvakohin) haldamisele, et kohandada heli kõrgust ja variatsioone Tinnitus Breaker Pro abil või valida loodusheliid**.
5. **Navigeerimismenüü**

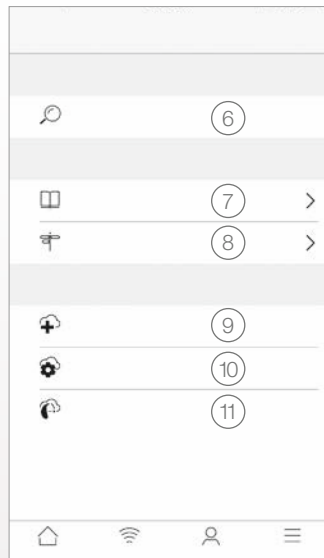

Minu menüü:

6. Leidke oma **kadunud kuulmisabivahend**.
7. **Lugege rakenduse** ja selle funktsioonide kohta.
8. **Soovitused** rakenduse ja kuulmisabivahendi kasutamiseks.
9. **Abi saamine** kuulmisabivahendi häälestamiseks ja programmide häälestamiseks; pöörduge selleks oma kuulmisspetsialisti poole.
10. Vaadake **oma pöördumiste staatust ning installige häälestused** ja programmide uuendused, mida teie kuulmisspetsialist teile saadab. Tagasi eelmiste häälestuste juurde.
11. **Installige uus tarkvara**, mis on saadetud teie kuulmisabivahendite jaoks.

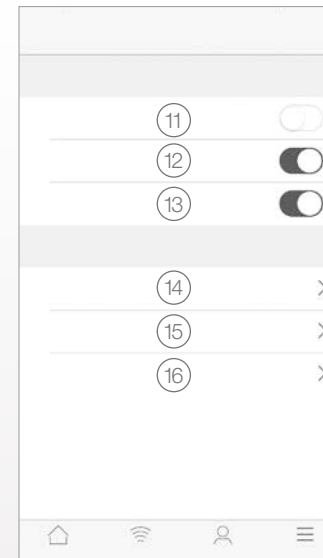

Lisamenüü

11. **Demorežiimi** sisse/välja lülitamine.
12. **Soovituste sisse/välja lülitamine**.
13. **Lemmikkohtade automaatse käivitamise** sisse/välja lülitamine.
14. **Teave**. Lugege rakenduse ja kaubamärgi kohta.
15. **Õiguslik teave**. Lugege tootja, tingimuste ja privaatsuse kohta. Tutvuge andmete töötlemiseks nõusoleku andmise üksikasjadega, andke nõusolek või loobuge sellest.
16. **Tugi**. Täiendav abi rakenduse kasutamiseks ning veebipõhise abi ja KKK täiendavad lingid.

Mobiilseadme rakenduste kavandatud kasutamine:

Mobiilseadme rakendused on kavandatud kasutamiseks koos traadita kuulmisabivahenditega. Mobiilseadme rakendus saadab signaale traadita kuulmisabivahendile ja võtab neid sellelt vastu mobiilseadme abil, mille jaoks rakendus on loodud.



Beltone
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Taani

Mis tahes küsimused seoses Euroopa Liidu kehtiva meditsiiniseadmete direktiiviga (direktiiv 93/42/EMÜ) tuleb esitada ettevõttele Beltone A/S.

Beltone HearPlus™ rakendus



Rakendus Beltone HearPlus annab teile võimaluse kontrollida nii põhiseadistusi kui ka täiustatud omadusi, nii et saate paremini kohandada oma kuulmisabivahendit oma vajadustele.

Rakendus Beltone HearPlus oli esimene kuulmisabivahendi rakendus, mis võimaldas otsesidet kuulmisabivahendi ja mobiiltelefoni vahel.

Rakendus Beltone HearPlus on saadaval App Store'is ja Google Play's.

Rakenduse kasutamiseks on teil vaja järgmisi seadmeid:

Kuulmisabivahendid:

- Beltone Bluetooth 4.0-suutlikkusega kuulmisabivahendid*:
Beltone Legend, Beltone First, Beltone Boost ja Beltone Boost Plus.

Mobiilseadmed:

- iPhone, iPad või iPod touch. Rakendus Beltone HearPlus ühildub ka Apple Watch'iga.
- Vajaliku toega Androidi seadmed.


Külastage meie veebisaiti täpsema teabe saamiseks ühilduvuse ja ühilduvate mobiilseadmete uuendatud loetelu kohta:

www.beltone-hearing.com/compatibility


*Veenduge, et teie kuulmisabivahendite tarkvara on uuendatud ja et teil on kõige uuem püsivara versioon.
Teie kuulmisabivahendite spetsialist võib uuendada teie abivahendi püsivara.



Beltone HearPlus™ rakenduse funktsioonid

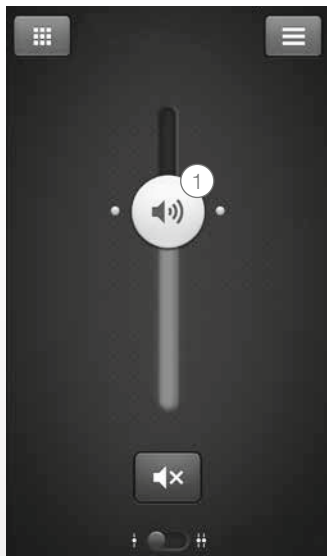

1. Muutke **helitugevust** ja lülitage heli välja mõlemal või vaid ühel kuulmisabivahendil.

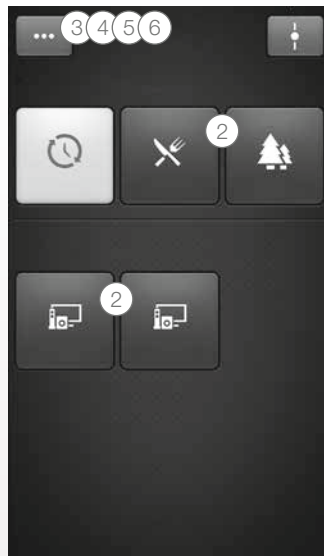


2. Muutke käsitsi häälestatavaid ja voogedastuse **programme**.
3. Kohandage **kõrgeid ja bassitoone** vastavalt oma soovile.
4. Looge **lemmikud**, et salvestada eelistatud programme ja seadeid. Siduge lemmikvalik konkreetse kohaga.
5. Kasutage **heli parandajat** täiustatud omaduste kohandamiseks: mugavustase müra korral, kõnele keskendumine ja mugavustase tuulemüra korral*.
6. Kasutage **tinnituse (kõrvakohin) haldajat**, et muuta helikõrgust ja variatsiooni Tinnitus Breaker Pro omaduse abil**.

Kasutage tinnituse haldajat, et valida oma lemmik loodusheli™**.

*Saadaval Beltone Legend 17 ja Beltone Boost Plus 17 jaoks.

**Saadaval Beltone Legend ja Beltone Boost Plusi jaoks, kui Tinnitus Breaker Pro omadus on sisse lülitatud teie kuulmisspetsialisti poolt.

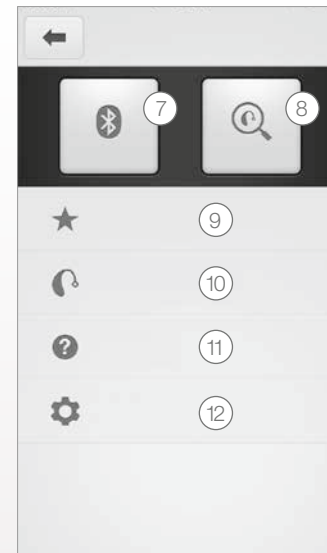

7. **Ühendus**. Vt patarei- ja ühenduse staatust.
8. **Otsija**. Aitab leida kadunud või kõrvalisse kohta pandud kuulmisabivahendit.
9. **Lemmikud**. Vaadake ülevaadet, muutke, kustutage kandeid, mis on salvestatud lemmikutesse.
10. **Minu kuulmisabivahend**. Leidke personaliseeritud teavet oma kuulmisabivahendi kohta.
11. **Õpetus**. Rakendusesisesed õpetused aitavad teil rakenduse omadusi tundma ja kasutama õppida.
12. **Häälestused**. Muutke programmide nimesid, kustutage lemmikuid, sisenege ja väljuge demorežiimist ning vaadake rakenduse taustateavet.

Mobiilseadme rakenduste kavandatud kasutamine:

Mobiilseadme rakendused on kavandatud kasutamiseks koos traadita kuulmisabivahenditega. Mobiilseadme rakendus saadab signaale traadita kuulmisabivahendile ja võtab neid sellelt vastu mobiilseadme abil, mille jaoks rakendus on loodud.



Beltone
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Taani

Mis tahes küsimused seoses Euroopa Liidus kehtiva meditsiiniseadmete direktiiviga (direktiiv 93/42/EMÜ) tuleb esitada ettevõttele Beltone A/S.

Beltone SmartRemote



Rakendus Beltone SmartRemote pakub teile võimalust hallata oma kuulmisabivahendeid. Seda kasutatakse koos Beltone Direct Phone Link 2-ga ning see võimaldab teil hõlpsalt oma mobiiltelefoni kaudu saada ülevaade oma Beltone'i traadita kuulmisabivahenditest ja hallata neid ja nende traadita lisaseadmeid.

Rakendus Beltone SmartRemote on saadaval App Store'is ja Google Play's.

Rakenduse kasutamiseks on teil vaja järgmisi seadmeid:

Kuulmisabivahendid:

- Beltone'i traadita kuulmisabivahendid.

Traadita lisaseade:

- Beltone Direct Phone Link 2.

Mobiilseadmed:

- iPhone, iPad või iPod touch, millel on operatsioonisüsteem iOS 7 või hilisem versioon.
- Androidi seadmed*, millel on operatsioonisüsteem Android OS 2.3.5 või hilisem versioon.

Parima toimimise tagamiseks tuleks Beltone SmartRemote rakendust kasutada aktiivselt vaid ühe mobiilseadmega korraga.


Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti

www.beltone-hearing.com/hearplus

*Funktsionaalsus on kinnitatud valitud HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsungi ja Sony toodete mudelitel.



Beltone SmartRemote™ rakenduse funktsioonid

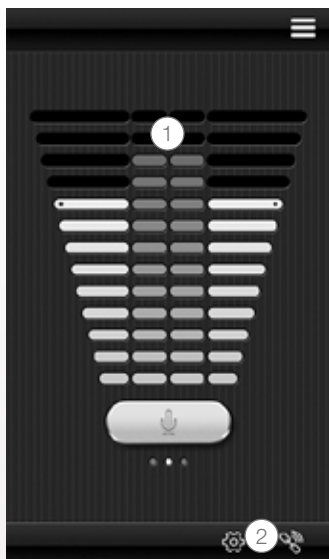

1. **Muutke helitugevust** või lülitage heli välja oma traadita kuulmisabivahendites. Muutke helitugevust või lülitage heli välja oma traadita lisaseadmetes.

2. Kasutage spetsiaalset **lingiekraani**, et vaadata ühendusi rakenduse ja oma kuulmisabivahendite vahel.



3. **Muutke käsitsi häälestatavaid ja voogedastusprogramme**

Mobiilseadme rakenduste kavandatud kasutamine:

Mobiilseadme rakendused on kavandatud kasutamiseks koos traadita kuulmisabivahenditega. Mobiilseadme rakendus saadab signaale traadita kuulmisabivahendile ja võtab neid sellelt vastu mobiilseadme abil, mille jaoks rakendus on loodud.



0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Taani

Mis tahes küsimused seoses Euroopa Liidu kehtiva meditsiiniseadmete direktiiviga (direktiiv 93/42/EMÜ) tuleb esitada ettevõttele Beltone A/S.

Rakendus Beltone Tinnitus Calmer



Rakendus Beltone Tinnitus Calmer pakub tasakaalustatud ja paindlikku tinnituse (kõrvakohin) haldamist. Selleks kasutatakse erinevate helide ja rahustavate harjutuste kombinatsiooni, et juhtida teie aju tähelepanu kohinalt kõrvale. Aja jooksul harjub teie aju pöörama vähem tähelepanu kohinale. Lisaks on rakenduses nõustamise ja teraapia komponendid, mille hulka kuulub seitse toimetulekuoskust, mis pakuvad abi tinnituse mõistmiseks ja sellega toime tulemiseks.

Rakendus on abivahendiks kõigile, kelle kaebuste hulka kuulub tinnitus. Rakendust tuleb kasutada koos tinnituse haldamise programmiga või kuulmisspetsialisti poolt määratud raviplaaniga.

Rakendus Beltone Tinnitus Calmer on saadaval App Store'is ja Google Play's.

Rakenduse kasutamiseks on teil vaja järgmisi seadmeid:

Kuulmisabivahendid:

- Beltone Bluetooth 4.0-suutlikkusega kuulmisabivahendid otsese voogedastuse jaoks iPhone'ist, iPad'ist või iPod touch'ist või Beltone'i traadita kuulmisabivahendid koos Direct Phone Link 2 lisaseadmega otsese audiovoogedastuse jaoks Androidi seadmetest.

Mobiilseadmed:

- iPhone, iPad või iPod touch.
- Androidi seadmed*, millel on operatsioonisüsteem Android 4.1 või hilisem versioon.


Peakomplekt:

- rakendust võib kasutada tavapärase peakomplektiga, mis on ühendatud telefoniga.


Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer



Beltone Tinnitus Calmer™ rakenduse funktsioonid

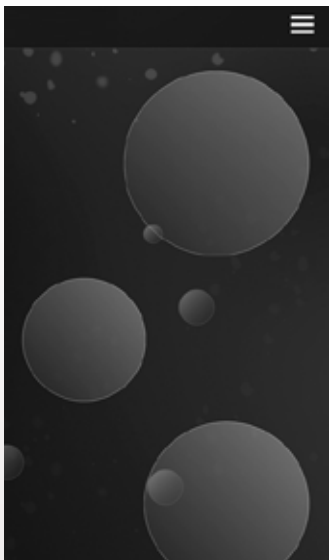

Rakenduse abil on teil võimalik hallata oma isiklikku heliteraapiafailide kogu ning luua oma helimaastike loodushäältest ja lühikestest muusikalõikudest.

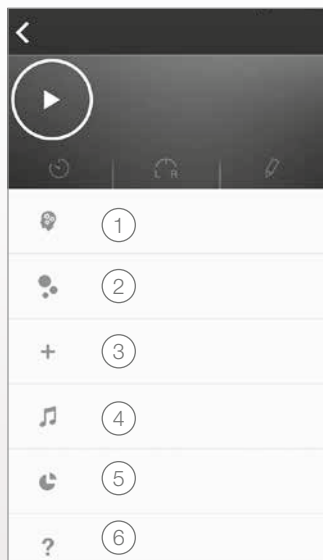

1. **Tinnitusega toimetulek.** Seitse toimetulekustrateegiat tinnituse jaoks.
2. **Alla laetud failid.** Laadi alla uus heli.
3. Looge **uus helimaastik**
4. **Helikogu.** Muusikafailid
5. **Minu kasutamine.** Rakenduse kasutamise jälgimine, et selgitada, millised helid sobivad teile kõige paremini.
6. **Nõuanded**

Rakenduse kavandatud kasutamine:

Rakendus on kavandatud heliteraapia ja rahustavate harjutuste pakkumiseks, mille eesmärk on juhtida tinnituse kaebusega patsiendi tähelepanu tinnituselt kõrvale. Seda on võimalik kasutada osana tinnituse haldamise plaanist. See ei ole mõeldud kasutamiseks sümptomaatilise tinnituse audioloogiliseks/ontoloogiliseks raviks ega sisemiste helide peitmiseks.



Tinnitusega seotud hoiatus

Võimaliku kuulmiskao vältimiseks, ärge kuulake kõrge helitugevusega sisu pika aja jooksul.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Taani

Mis tahes küsimused seoses Euroopa Liidu kehtiva meditsiiniseadmete direktiiviga (direktiiv 93/42/EMÜ) tuleb esitada ettevõttele Beltone A/S.

Tähistused „Hoiatus“ ja „Ettevaatust“

⚠ **Kasutage koos mobiilseadme rakendustega:**

Rakenduses ei tohiks lülitada välja rakenduse teatisi. Kasutajatel soovitatakse installida kõik uuendused rakenduse korrakohase toimimise ja ajakohastatuse tagamiseks.

Rakendust tuleb kasutada vaid koos Beltone'i seadmetega, mille jaoks see on mõeldud, ning Beltone ei vastuta selle eest mingil moel, kui rakendust kasutatakse muude seadmetega.

⚠ **Hoiatused:**

Kui te kasutate Beltone'i rakendust koos kuulmisabivahendiga, siis palun lugege kuulmisabivahendi kasutajale mõeldud juhendit. Kuulmisabivahendi kasutajajuhend on lisatud vahendi pakendisse. Kui vajate uut juhendit, võtke ühendust Beltone'i klienditeenindusega.



Pange tähele hoiatustähisega tähistatud teavet



HOIATUS juhib tähelepanu olukordadele, mis võivad kaasa tuua tõsisemaid kahjustusi,
ETTEVAATUST tähistab olukordi, mis võivad kaasa tuua väikeseid või keskmisi kahjustusi.



Beltone. Aitame maailmal kuulda paremini

Beltone'i asutamise aluseks oli soov aidata sõbral nautida elu rohkem. Alates aastast 1940 pakume me teadmisi, vahendeid, teenuseid ja koolitust professionaalidele, kes aitavad kuulmisprobleemidega inimesi. Beltone võimaldab suuremal hulgal inimestel pääseda juurde kvaliteetsetele kuulmisabivahenditele. Sel eesmärgil me loome tehniliselt optimaalseid kuulmislahendusi, pöörates tähelepanu ka individuaalsetele vajadustele. Me usume, et igal inimesel peab olema võimalus elada paremat elu parema kuulmisega.

MAAILMA PEAKORTER

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Taani
Tel +45 45 75 11 11
beltone-hearing.com
CVR nr 55082715

© 2017 GN Hearing Care Corporation. Kõik õigused kaitstud. Beltone on kaubamärk, mis kuulub ettevõttele GN Hearing Care Corporation. Apple, Apple'i logo, iPhone, iPad, iPod touch ja Apple Watch on kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Apple Inc., mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. App Store on teenusmärk, mis kuulub ettevõttele Apple Inc., mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. Android, Google Play ja Google Play logo on kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Google Inc. Androidi robot on toodetud või seda on muudetud tööst, mille on loonud ja mida jagab Google, ning mida kasutatakse vastavalt tingimustele, mida on kirjeldatud „Creative Commons“ omistamislicentsi versioonis 3.0. Bluetooth sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

