

Beltone apps gebruikershandleiding



Inleiding

Beltone-apps zijn gemaakt om uw gehoorervaring te verbeteren en u beter te laten profiteren van uw Beltone-hoortoestellen.


De innovatieve geluidstechnologie en het innovatieve ontwerp van Beltone zorgen, in combinatie met het aangepaste programma dat door uw audicien geselecteerd is, voor een prettigere ervaring.

Met de Beltone-apps haalt u meer uit uw Beltone-hoortoestellen, omdat ze nieuwe manieren bieden voor controle, personalisatie en verlichting.

Ga voor meer informatie en hulp bij de apps naar de website:

www.beltone-hearing.com/apps

Als u een gedrukte versie van de gebruikershandleiding voor een app wilt, vraag deze dan aan via de klantenservice of druk deze gebruikershandleiding af.

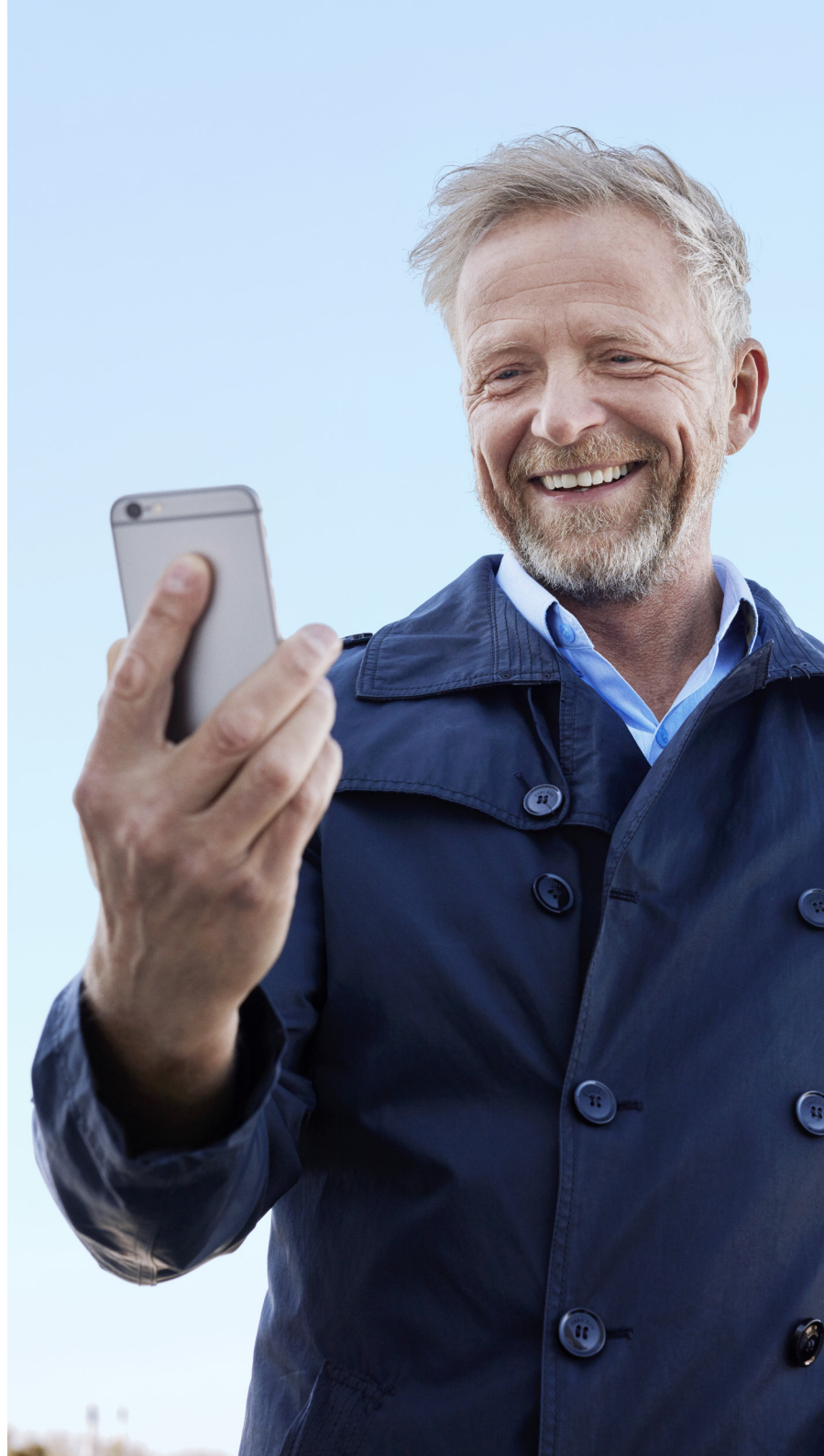

De app zoeken en installeren



Open apps voor iPhone, iPad en iPod touch - download ze in de App Store door deze stappen uit te voeren:

1. Ga naar de App Store door te tikken op het App Store-icoon  op de iPhone, iPad of iPod touch
2. Zoek in de App Store naar "Beltone" en de naam van de app
3. Als u een iPad gebruikt, dient u de zoekcriteria links bovenin te wijzigen in iPhone only (alleen iPhone).
4. Als u de app gevonden hebt, tikt u op 'Get' (Download)
5. Vervolgens tikt u op "Install" (installeren)
6. Voer een geldig Apple ID en -wachtwoord in
7. Na het invoeren van het wachtwoord wordt de Beltone app gedownload en geïnstalleerd
8. Na het downloaden vindt u de app op het scherm van het mobiele apparaat - tik erop om de Beltone app te openen



Apps openen voor Android-apparaten - downloaden in Google Play via onderstaande stappen:

1. Open Google Play door te tikken op het pictogram  voor de Play Store op uw Android-telefoon.
2. Zoek in Google Play naar "Beltone" en de naam van de app
3. Tik als u de app gevonden hebt op "Install" (installeren) en op "Accept" (Accepteren) om toe te staan dat de app bepaalde functies op uw telefoon gebruikt, zoals Bluetooth
4. Na het invoeren van het wachtwoord wordt de Beltone app gedownload en geïnstalleerd
5. Tik na het installeren van de app op "Open" (Openen) om de Beltone app te openen

Beltone HearMax



De Beltone HearMax-app ongeëvenaarde gebruikersvriendelijkheid met slechts een tik met uw vinger. Controleer de instellingen van uw hoortoestel en pas ze aan vanaf uw mobiele apparaat, zodat u uw hoorerervaring kunt aanpassen aan uw geluidsomgeving. U kunt uw hoorspecialist ook vragen om uw hoortoestelprogramma's bij te werken en u kunt updates voor uw hoortoestel op afstand ontvangen zodat u niet naar de kliniek hoeft te gaan (beschikbaar op geselecteerde markten). Deze app helpt u met alles wat u kunt doen en hoe u het kunt doen.

De Beltone HearMax-app is gratis verkrijgbaar in de App en op Google Play.

Om de app te gebruiken hebt u de volgende apparaten nodig:

Hoortoestellen:

- Beltone Bluetooth 4.0-geschikte hoortoestellen*: Beltone Trust™ of latere uitgave.


Mobiele apparaten:

- iPhone, iPad of iPod touch. De Beltone HearMax-app is ook compatibel met Apple Watch.
- Ondersteunde Android-mobiele apparaten.


Ga naar onze website voor specifieke compatibiliteitsinformatie en een bijgewerkte lijst met compatibele mobiele apparaten:

www.beltone-hearing.com/compatibility

*Zorg dat de nieuwste firmware-versie op de hoortoestellen staat. Uw hoorspecialist kan de firmware in de hoortoestellen voor u bijwerken.

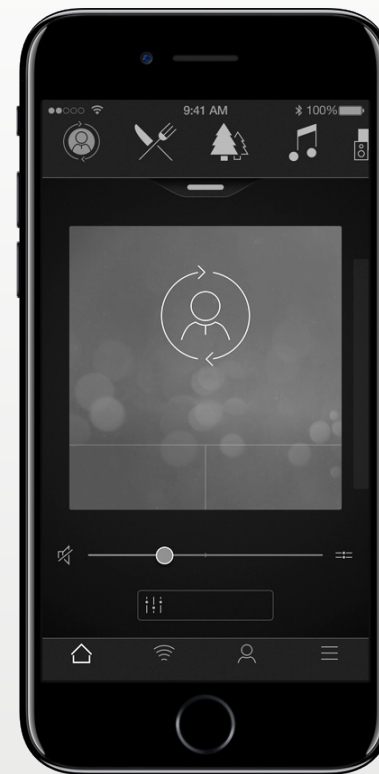

Functionaliteit Beltone HearMax™-app

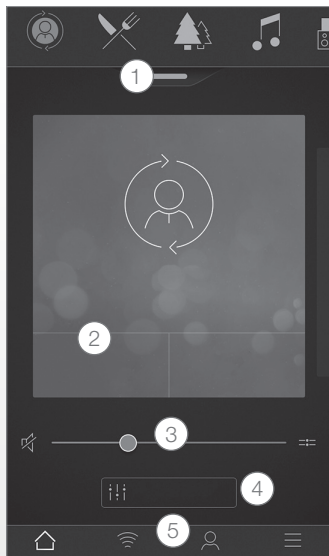


*Verkrijgbaar voor Beltone Trust 17 en Beltone Boost Max 17.

**Verkrijgbaar als de Tinnitus Breaker Pro-functie ingeschakeld is door uw hoorspecialist.


Hoofdscherm:

1. Gebruik de top carousel, **drop-down** of kaart doorhalen om uw hoortoestel- of streaming-programma te kiezen, of uw Favoriet. Tik op de drop-down om Programma's en Favorieten te bewerken.
2. Gebruik **Quick Buttons** voor geavanceerde geluids aanpassingen met een tik.
3. Past **volume** aan of zet op stil.
4. Toegang tot **Sound Enhancer** om treble/mid/bass, ruisonderdrukker, spraakfocus of windruisonderdrukking bij te stellen*. Ook toegang tot Tinnitus Manager om toonhoogte en variatie van geluid van de Tinnitus Breaker Pro bij te stellen of kies uw Natuurgeluid**.
5. **Navigatiemenu**.

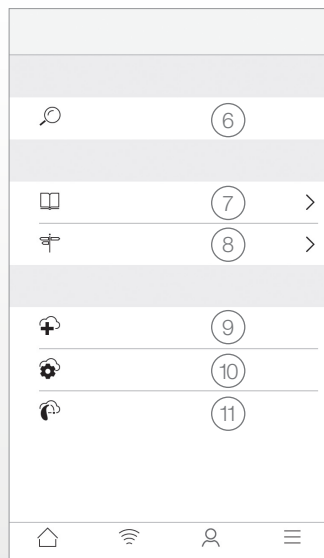

'Mijn' menu:

6. Vind uw **hoortoestel**.
7. **Leer meer over de app** en de functies.
8. **Handige tips** voor gebruik van de app en de hoortoestellen.
9. **Vraag hulp** aan uw hoorspecialist bij de instellingen en programma's van uw hoortoestel.
10. Bekijk de **status van uw verzoeken en installeer alle instellings-** en programma-updates die uw hoorspecialist u stuurt. Terug naar vorige instellingen.
11. **Installeer nieuwe software** die u krijgt voor uw hoortoestellen.

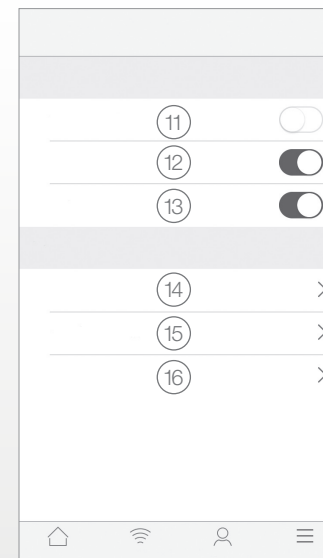

Mijn menu:

11. Demo-modus **openen/sluiten**.
12. Handige tips **inschakelen/uitschakelen**.
13. Automatische activatie van Favoriete locaties **inschakelen/uitschakelen**.
14. **Over:** Leer meer over de app en het merk.
15. **Juridische informatie:** Meer over de producent, voorwaarden en privacybeleid. Beoordeel toestemming voor gegevensverwerking, geef het of trek het in.
16. **Ondersteuning:** meer hulp bij de app en extra links naar webhulp en FAQ's.

Beoogd gebruik van apps voor mobiele apparaten:

Apps voor mobiele apparaten zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met draadloze hoortoestellen. Apps voor mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van draadloze hoortoestellen van via smartphones waarvoor de apps ontwikkeld zijn.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Alle zaken betreffende de EU-richtlijn medische apparaten 93/42/EEC dienen gemeld te worden aan Beltone A/S.

Beltone HearPlus™-app



Met de Beltone HearPlus-app kunnen uw klanten zowel de basisinstellingen als de meer geavanceerde functies bedienen. Op deze manier kunnen zij hun persoonlijke hoorervaring aan hun eigen wensen aanpassen. De Beltone HearPlus-app was de eerste hoortoestel-app met een rechtstreekse verbinding tussen hoortoestel en de mobiele telefoon.

De Beltone HearPlus-app is gratis verkrijgbaar in de App en op Google Play.

Om de app te gebruiken hebt u de volgende apparaten nodig:

Hoortoestellen:

- Beltone Bluetooth 4.0-geschikte hoortoestellen*: Beltone Legend, Beltone First, Beltone Boost en Beltone Boost Plus.


Mobiele apparaten:

- iPhone, iPad of iPod touch. De Beltone HearPlus-app is ook compatibel met Apple Watch.
- Ondersteunde Android-mobiele apparaten.


Ga naar onze website voor specifieke compatibiliteitsinformatie en een bijgewerkte lijst met compatibele mobiele apparaten:

www.beltone-hearing.com/compatibility


* Zorg dat de nieuwste firmware-versie op de hoortoestellen staat. Uw hoorspecialist kan de firmware in de hoortoestellen ook voor u bijwerken.

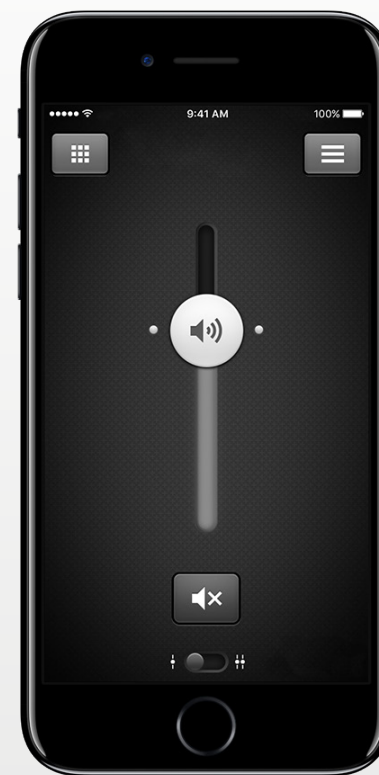

Functionaliteit Beltone HearPlus™-app

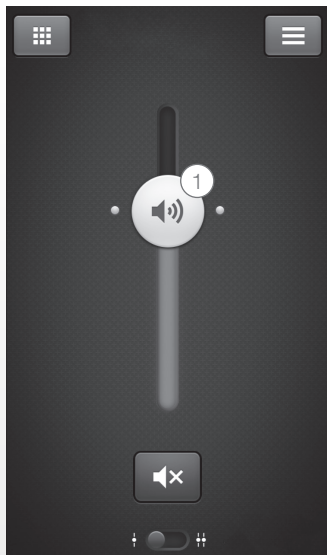

1. Pas het **volume** voor beide hoortoestellen of voor ieder hoortoestel afzonderlijk aan of zet het uit.

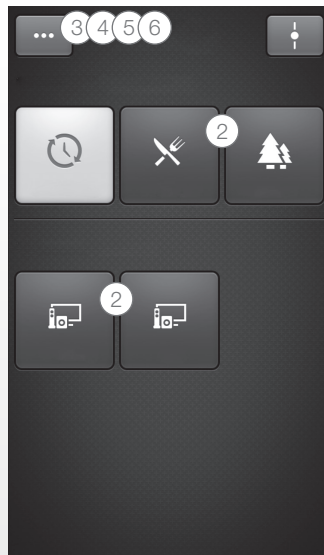

*Verkrijgbaar voor Beltone Legend 17 en Beltone Boost Plus 17.

**Verkrijgbaar voor Legend en Boost Plus als de Tinnitus Breaker Pro-functie ingeschakeld is door uw hoorspecialist.

2. Wijzig handmatige en streamer-programma's


3. Pas **hoge en lage tonen** aan uw voorkeuren aan.

4. Creëer **Favorieten** om voorkeursprogramma's en instellingen op te slaan. Koppel een Favoriet aan een specifieke locatie.

5. Gebruik **Sound Enhancer** voor geavanceerde aanpassingen van functies: Comfort in lawaai, Spraakverstaan En Comfort in de wind*

6. Gebruik **Tinnitus Manager** om toonhoogte en variatie van geluid van de Tinnitus Breaker Pro bij te stellen**.

Gebruik Tinnitus manager voor het kiezen van het gewenste Nature Sound™**

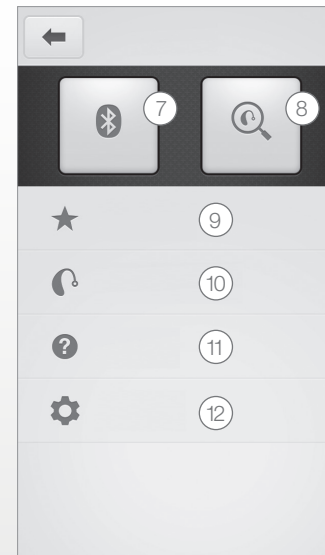

7. **Verbinding:** De batterij - en verbindingstatus te bekijken

8. **Zoeken:** Hulp bij het zoeken van verloren of kwijt geraakte hoortoestellen.

9. **Favorieten:** Bekijk een overzicht van of bewerk of verwijder opgeslagen Favorieten.

10. **Mijn hoortoestel:** Vind persoonlijke informatie over uw hoortoestel.

11. **Tutorial:** De in-app tutorial helpt u op weg met de functies in de app.

12. **Instellingen:** Bewerk en personaliseer programmanamen, verwijder alle favorieten en sluit de demomodus af en bekijk achtergrondinformatie over de app.

Beoogd gebruik van apps voor mobiele apparaten:

Apps voor mobiele apparaten zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met draadloze hoortoestellen. Apps voor mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van draadloze hoortoestellen van via smartphones waarvoor de apps ontwikkeld zijn.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Alle zaken betreffende de EU-richtlijn medische apparaten 93/42/EEC dienen gemeld te worden aan Beltone A/S.

Beltone SmartRemote



Met de Beltone SmartRemote app kunt u uw hoortoestellen bedienen. In combinatie met de Direct Phone Link 2 kunt u met Beltone SmartRemote uw mobiele apparaat gebruiken voor een eenvoudig overzicht van en het extern bedienen van uw Beltone draadloze hoortoestellen en Beltone Direct Line draadloze accessoires.

De Beltone SmartRemote-app is gratis verkrijgbaar in de App en op Google Play.

Om de app te gebruiken hebt u de volgende apparaten nodig:

Hoortoestellen:

- Beltone draadloze hoortoestellen.

Draadloze accessoire:

- Beltone Direct TelefoonLink 2.

Mobiele apparaten:

- iPhone, iPad or iPod touch draaiend op iOS 7 of hoger.
- Android apparaten* met Android OS 2.3.5 of hoger.

Voor de beste prestaties mag de Beltone SmartRemote app niet actief gebruikt worden op meer dan één mobiel apparaat tegelijkertijd.


Ga voor meer informatie naar

www.beltone-hearing.com/smartremoteapp

Functionaliteit gecontroleerd op bepaalde modellen van HTC, *Huawei, LG, Motorola, Samsung en Sony.




Functionaliteit Beltone SmartRemote™-app

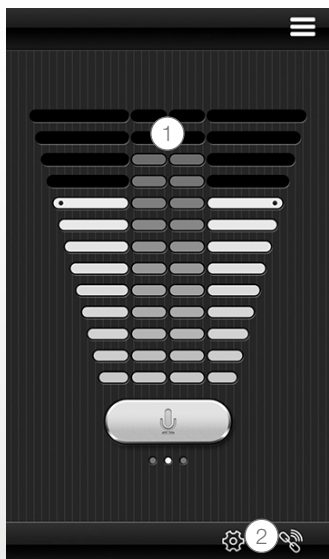

1. **Pas het volumeniveau** op uw draadloze hoortoestellen aan of zet het stil. Pas het volumeniveau op uw draadloze accessoires aan of zet het stil.

2. Gebruik het speciale **koppelscherm** voor een overzicht van de aansluitingen tussen de app en uw hoortoestellen

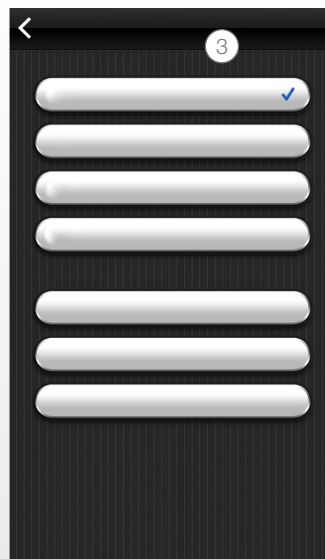

3. **Wijzig handmatige en streamer-programma's**

Beoogd gebruik van apps voor mobiele apparaten:

Apps voor mobiele apparaten zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met draadloze hoortoestellen. Apps voor mobiele apparaten verzenden en ontvangen signalen van draadloze hoortoestellen van via smartphones waarvoor de apps ontwikkeld zijn.

CE
0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Alle zaken betreffende de EU-richtlijn medische apparaten 93/42/EEC dienen gemeld te worden aan Beltone A/S.

Beltone Tinnitus Calmer-app



De Beltone Tinnitus Calmer-app biedt gebalanceerd en flexibel tinnitusbeheer. Het maakt gebruik van een combinatie van geluiden en ontspanningsoefeningen die bedoeld zijn om uw aandacht van uw tinnitus af te leiden. Mettertijd leren uw hersenen zich minder te richten op de tinnitus. Daarnaast breiden zeven copingsvaardigheden verder uit op de advies- en therapie-elementen van de app, met interessante tips voor het omgaan met en begrijpen van tinnitus.

De app is een tool voor iedereen die aan tinnitus leidt. Hij moet gebruikt worden in combinatie met een tinnitusbeheerprogramma of een plan dat is opgesteld door een audicien.

De Beltone Tinnitus Calmer-app is verkrijgbaar in de App en op Google Play.

Om de app te gebruiken hebt u de volgende apparaten nodig:

Hoortoestellen:

- Beltone Bluetooth 4.0-hoortoestellen voor direct streamen vanaf een iPhone, iPad of iPod touch of voor draadloos gebruik geschikte Beltone-hoortoestellen in combinatie met een Direct Phone Link 2-accessoire voor directe audio-streaming op Android-apparaten.

Mobiele apparaten:

- iPhone, iPad of iPod touch.
- Android apparaten * met Android OS 4.1 of hoger.

Hoofdtelefoon:

- U kunt de app ook gebruiken met een standaard hoofdtelefoon die met de telefoon is verbonden.


Ga voor meer informatie naar: www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer



Functionaliteit Beltone Tinnitus Calmer™-app



Met de app kunt u uw persoonlijke bibliotheek van geluidstherapiebestanden beheren en kunt u uw eigen soundscapes maken van omgevingsgeluiden en korte muziekstukken.

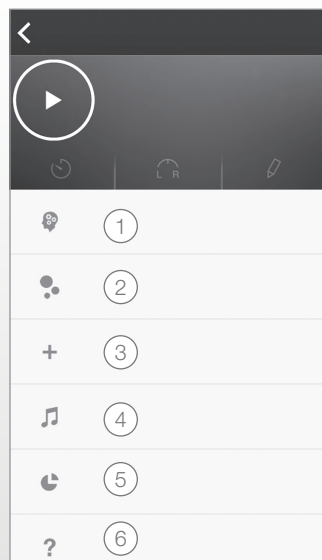

1. **Omgaan met tinnitus:** zeven copingsvaardigheden om uw tinnitus te managen.
2. **Downloads:** download nieuwe geluiden.
3. Nieuwe **SoundScape** maken.
4. **Geluidenbibliotheek:** muziekbestanden.
5. **Mijn gebruik:** Traceer app-gebruik, zodat u kunt zien welke geluiden het best werken voor u
6. **Handige tips.**

Beoogd gebruik van de app:

De app is bedoeld om geluidstherapie en ontspanningsoefeningen te bieden die bedoeld zijn om de aandacht van een patiënt af te leiden van tinnitus. Hij kan gebruikt worden als onderdeel van een tinnitusbeheerplan. Hij is niet bedoeld voor gebruik in audiologische/ontologische behandelingen van symptomatische tinnitus of voor het maskeren van interne geluiden.



Tinnitus waarschuwing:

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere tijdspannen naar geluiden op hoog volume luisteren.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Alle zaken betreffende de EU-richtlijn medische apparaten 93/42/EEC dienen gemeld te worden aan Beltone A/S.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Gebruik met mobiele apps:

Meldingen van app-updates mogen niet uitgeschakeld worden, en het wordt aanbevolen dat de gebruiker alle updates installeert om te zorgen dat de app correct functioneert en up-to-date blijft.

De app mag alleen gebruikt worden in combinatie met Beltone-toestellen waarvoor hij bedoeld is, en Beltone aanvaardt geen verantwoordelijkheid als de app gebruikt wordt in combinatie met andere toestellen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

als u de Beltone app met het hoortoestel gebruikt, lees dan de gebruikershandleiding bij de hoortoestellen zorgvuldig door. De gebruikershandleiding bij de hoortoestellen is meegeleverd bij de hoortoestellen. Als u een nieuw exemplaar nodig hebt, neem dan contact op met de klantenservice van Beltone.

Let op de informatie die gemarkeerd is met het waarschuwingssymbool

 **WAARSCHUWING** wijst op situaties die kunnen leiden tot ernstige verwondingen,
VOORZORGMAATREGELEN geven situaties aan die kunnen leiden tot lichte en matige verwondingen.



Beltone. Iedereen heeft het recht om goed te horen.

De basis voor Beltone werd gelegd met een vriendendienst: de oprichter hielp een kennis om hem meer levensvreugde te bezorgen. Al sinds 1940 bieden we kennis, middelen, service en training aan audiciens. Beltone maakt hoogwaardige hoortoestellen die beschikbaar zijn voor een grote groep gebruikers. Daarvoor ontwikkelen we technisch hoogstaande hooroplossingen, waarbij we de behoeften van het individu nooit uit het oog verliezen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen de mogelijkheid moet hebben de kwaliteit van zijn leven te verbeteren dankzij een beter gehoor.

BELTONE WELTWEIT

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
beltone-hearing.com
CVR no. 55082715

NEDERLAND

GN Hearing Benelux BV
Het Hazeland 5-7
6931 KA Westervoort
Tel: +31 (0)26 319 5000
info@beltone.nl
beltone.nl

CONTACT BELGIË

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tel: + 32 (0)2 513 55 91
info@beltone.be
beltone.nl

© 2017 GN Hearing Care Corporation. Alle rechten voorbehouden. Beltone is een handelsmerk van GN Hearing Care Corporation. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast van werk dat gemaakt en gedeeld is door Google en wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die beschreven zijn in de Creative Commons 3.0 Attribution-licentie. Het merk en de logo's voor Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

