

Jederzeit verbunden



Konnektivität
und Zubehör

 **Beltone™**

 **AURACAST**
A BLUETOOTH® TECHNOLOGY

Zukunftsfähige Konnektivität

Verbinden Sie sich mit Menschen, Nachrichten und Unterhaltungen, wo auch immer Sie sich mit Ihren Beltone-Hörsystemen befinden.

Ein zukunftsfähiges Bluetooth®-Erlebnis

Mit Beltone-Hörsystemen und Bluetooth Low Energy (LE) Audio* maximieren Sie Ihr Streaming-Erlebnis. Genießen Sie den klarsten Streaming-Sound, bei geringerem Stromverbrauch und smarter Konnektivität.**

Entdecken Sie die neue Auracast™-Welt

Verbinden Sie sich mit einem Auracast-Stream an öffentlichen Orten (z. B. am Flughafen, den Fernsehton im Fitnessstudio oder dem Audio-guide in einem Museum).



* Bluetooth LE Audio funktioniert mit Beltone Envision, Beltone Boost Max S, Beltone Commence und Beltone Serene sowie kompatiblen Mobilgeräten und Bluetooth 5.3 oder höher


** Bluetooth SIG

Auracast™ für alle

Nutzen Sie den weltweit ersten Auracast Assistant für Hörsysteme.* Über die Beltone HearMax™ App können Sie nach Auracast-Streams suchen und diese mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden teilen.**

Und so geht's:

1. Klicken Sie auf „Suchen“.
2. Wählen Sie einen Auracast-Sender aus der Liste aus.
3. Genießen Sie die direkte Sound-Übertragung in Ihre Hörsysteme.

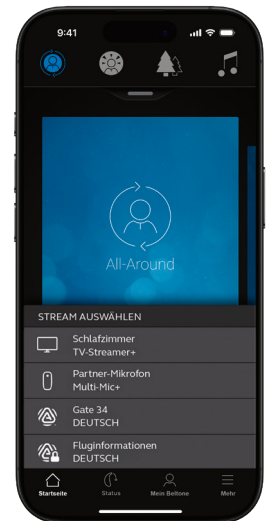

* Auracast Assistant funktioniert mit Beltone Envision, Beltone Boost Max S, Beltone Commence und Beltone Serene sowie kompatiblen Mobilgeräten mit Bluetooth 5.3 oder höher.

** Smartphone muss mit Beltone HearMax App kompatibel sein.

Mehr Streaming dank **MultiConnect**

Im Alltag sind wir häufig über mehrere Smartgeräte erreichbar – z. B. unser Smartphone, unseren Laptop oder Tablet.

Mit dem Beltone Envision microRIE und Beltone Boost Max S können Sie mit zwei Smartgeräten gleichzeitig verbunden sein.

Streamen Sie zum Beispiel einen Film über Ihren Laptop, hören Sie das Klingeln eines eingehenden Anrufs und können diesen direkt über TapControl mit dem Hörsystem annehmen. Nach dem Beenden des Telefonats wird das Streaming vom Laptop wieder aufgenommen.*

* Automatisches Fortsetzen des unterbrochenen Streams hängt von den Übertragungsprotokollen der Smartgeräte ab.



Kontrolle immer zur Hand

Mit der Beltone HearMax™ App können Sie Ihr Hörerlebnis jederzeit an die jeweilige Hörsituation anpassen. Behalten Sie auch in herausfordernden Hörsituationen den Überblick. So können Sie sich in Gesprächen auf das Wesentliche fokussieren.

Beltone HearMax App

Verwenden Sie die Beltone HearMax App für ein personalisiertes Hörerlebnis und passen Sie die Lautstärke an oder nehmen Sie Einstellungen an den Hörprogrammen vor.



Kristallklare Telefongespräche

Bleiben Sie in Verbindung, wo immer Sie sind. Die Bluetooth LE Audio Technologie bietet Ihnen zukunftsweisende Verbindungsmöglichkeiten.*

Verbindung mit mobilen Endgeräten

Verbinden Sie sich mit Ihrem iPhone, iPad oder Android™-Gerät und übertragen Sie Audiosignale direkt in Ihre Hörsysteme.** Steuern Sie die Lautstärke und nehmen Sie Ihre individuellen Einstellungen über die Beltone HearMax App vor.




* Bluetooth LE Audio funktioniert mit Beltone Envision, Beltone Boost Max S, Beltone Commence und Beltone Serene und kompatiblen Mobilgeräten mit Bluetooth 5.3 oder höher.

** Hands-Free-Anrufe sind kompatibel mit iPhone 11 oder höher, iPad Pro 12,9-Zoll (5. Generation), iPad Pro 11-Zoll (3. Generation), iPad Air (4. Generation), iPad mini (6. Generation), iPad (10. Generation) oder höher, mit Software-Updates iOS 15.3 und iPadOS 15.3 oder höher. Hands-Free-Anrufe sind möglich mit kompatiblen Mobilgeräten mit Bluetooth 5.3 oder höher.

Steuerung von Hörsystemen mit Android 16

Mit Android™ 16 ist es möglich, Hörsysteme direkt über das Bluetooth-Menü zu steuern.

Wie das geht, zeigen wir Ihnen am Beispiel von Samsung Galaxy Smartphones mit One UI 8 Betriebssystem, basierend auf Android 16.

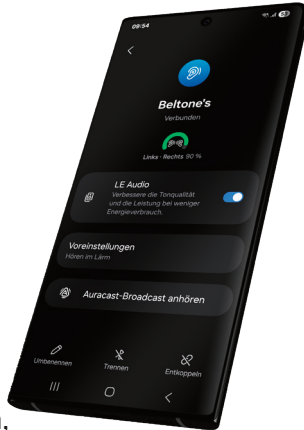


So erreichen Sie das Bluetooth-Menü in Samsung-Smartphones

1. Wählen Sie unter „Einstellungen“ die Option „Verbindungen“.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Bluetooth“ aus.

QR-Code scannen und Videoanleitung ansehen:





3. Verbinden Sie Ihre Hörsysteme, indem Sie diese neu starten und die Kopplung für jedes Gerät bestätigen.

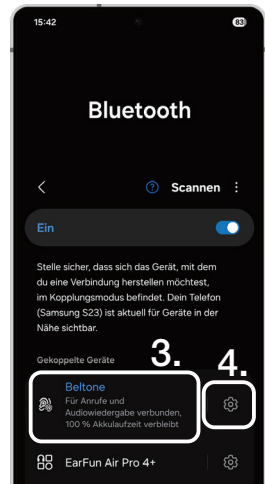

4. Klicken Sie auf das Zahnrad, um die Geräte-Einstellungen aufzurufen.

5. Sollte Ihr Smartphone LE Audio unterstützen, können Sie die Funktion hier aktivieren bzw. deaktivieren.

6. Den Namen Ihrer Hörsysteme können Sie hier individualisieren. Klicken Sie einfach auf „Umbenennen“.

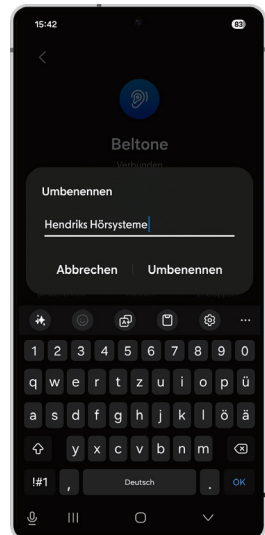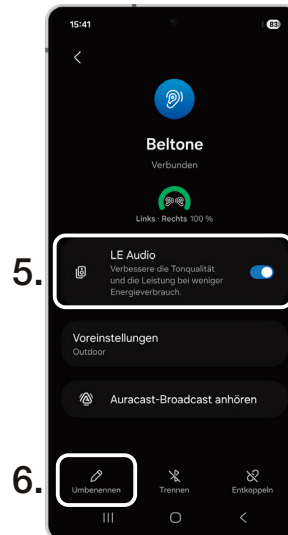

Unterstützung in herausfordernden Hörsituationen

In geräuschvollen Umgebungen fällt es häufig schwer, sein Gegenüber im Gespräch zu verstehen – besonders im Lärm.

Das Multi-Mic+

Erhalten Sie zusätzliche Unterstützung in herausfordernden Hörsituationen. Legen Sie das Multi-Mic+ dafür auf einen Tisch, befestigen Sie es an der Kleidung eines Gesprächspartners oder eines Moderators. Das Audiosignal wird an Ihre Hörsysteme übertragen.* So können Sie weiterhin an allen Gesprächen teilhaben.

Das erste externe Mikrofon mit Auracast

Mit dem Multi-Mic+ erfahren Sie die Zukunft der Konnektivität. Starten Sie einen Auracast-Stream und teilen Sie diesen mit weiteren Personen.



Für ein harmonisches TV-Erlebnis

Ist es herausfordernd für Sie, beim Fernsehen mit der Familie alles zu verstehen?

Unser TV-Streamer+ wird Sie dabei unterstützen.

TV-Streamer+

Der TV-Streamer+ bietet Ihnen beste Sprachverständlichkeit. Er nutzt Auracast und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit mehreren kompatiblen Hörsystemen* und Kopfhörern. Genießen Sie das TV-Erlebnis in hervorragender Audioqualität und in Ihrer individuell gewünschten Lautstärke.



* Kompatibel mit Beltone Envision, Boost Max S, Commence und Serene.



Mit der Beltone HearMax™ App können Sie Ihr Klangerlebnis personalisieren, eine Fern-Feinanpassung bei Ihrem Hörakustiker anfragen und erhalten zudem nützliche Tipps rund um Ihr neues Hörerlebnis und das Tragen Ihrer neuen Hörsysteme.



Wir von Beltone verstehen, dass Ihr Gehör so einzigartig ist wie Sie selbst. Wir freuen uns, ein auf Sie zugeschnittenes Hörerlebnis zu bieten, mit dem Sie das Leben wieder in vollen Zügen genießen können. Erleben Sie mit Beltone, was das Leben für Sie bereithält.

Erfahren Sie mehr unter beltone.com

Deutschland

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster
info-de@gnhearing.com

Österreich

GN Hearing Austria GmbH
Handelskai 94 - 96 / 23. Stock
1200 Wien
info-at@gnhearing.com



© 2026 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. Beltone ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo und iPhone sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Marken der Google LLC. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken der Bluetooth SIG, Inc. Samsung® ist eine eingetragene Marke der Samsung-Gruppe und Samsung Electronics in den USA oder weiteren Ländern.