

Beltone **Origin™**

Empezar a oír



Presentamos

el Nuevo Beltone Origin (RIE)



 **Beltone™**

PRESENTACIÓN DEL NUEVO BELTONE ORIGIN RIE (Auricular en el oído)



La gama Beltone Origin crece pero el audífono se hace más pequeño. Ahora puede ofrecer al usuario un RIE pequeño y atractivo de nuestra extensa gama Origin 3. Los usuarios disfrutarán de un producto estético y asequible, repleto de funciones avanzadas de procesamiento del sonido.



Tecnología avanzada para todos sus clientes

Apreciamos sinceramente sus testimonios de éxito en las adaptaciones, que ponen de relieve la calidad de diseño de nuestro último amplificador. Seguimos escuchando que la calidad del sonido es pura, clara y cómoda. La adaptación a la amplificación se ha vuelto mucho más fácil para los usuarios.

Nos han hecho saber que desean la misma calidad de sonido en una solución fácil de usar y accesible a todas las personas con discapacidad auditiva. Hacer que sea bueno. Y hacerlo asequible, para que todas las personas puedan experimentar los beneficios que los audífonos modernos ofrecen. Este es el origen de nuestra emocionante nueva familia de productos.

Sin sacrificar la calidad del sonido

En el centro de Beltone Origin está el mismo circuito integrado que es el fundamento de la gran calidad de sonido de nuestros productos más avanzados. Es potente y rápido, con un amplio rango dinámico. La salida es limpia, sin molestos ruidos artificiales. En pocas palabras, Beltone Origin simplemente suena mejor que otros audífonos en su categoría de precio.

Con Beltone Origin los usuarios consiguen una calidad de sonido superior en una solución orientada al valor, que es fácil de comprar, fácil de instalar y fácil de usar. Así que si son usuarios por primera vez o buscan un sonido superior a un precio asequible, Beltone Origin es idóneo para que sus clientes comiencen a oír. De nuevo.



Mejor audición gracias a mejor tecnología

Los audífonos Beltone Origin proporcionan a los usuarios una variedad de beneficios diseñados para mejorar su audición y calidad de vida:

Direccionalidad

Múltiples opciones para diferentes situaciones auditivas que ayudan a los usuarios a centrarse en lo que quieren oír, cuando quieren oírlo.

Procesamiento del feedback

Súprime el feedback sin reducir la calidad del sonido. Proporciona amplificación extra, por lo que los usuarios pueden obtener la ganancia que necesitan.

HPF⁸⁰ NanoBlock

Protege el audífono por dentro y por fuera de la humedad y la suciedad, lo que reduce los costes de reparación, prolonga la vida útil del dispositivo y mantiene al usuario más feliz durante más tiempo.

Auto Phone

Hay usuarios que tienen problemas o simplemente se olvidan de pulsar el botón correcto al utilizar el teléfono. Con Auto Phone, el audífono cambiará automáticamente a un programa telefónico cuando acerquen el teléfono al oído. Es inteligente, simple y fácil.

Audiometría in-situ


¿Se encuentra en un lugar donde no dispone de audiómetro? Ahora tiene la opción de utilizar el nuevo Beltone Origin BTE para medir el umbral de audición del paciente y utilizar esos datos para la primera adaptación. Con la audiometría in-situ de Beltone Origin, siempre estará en el lugar correcto para probar y hacer ajustes al usuario, sin importar dónde se encuentre.



Un modelo y tamaño para cada necesidad

Beltone Origin tiene una gama de formatos que puede satisfacer a sus clientes. Está disponible en todos los niveles de potencia para adaptarse a cualquier pérdida de audición.


Los clientes preocupados por la estética pueden elegir el pequeño miniBTE. Aquellas personas que necesitan más potencia disponen de los modelos BTE estándar o superpotentes. Además, todos los modelos Beltone Origin están disponibles en distintos colores.

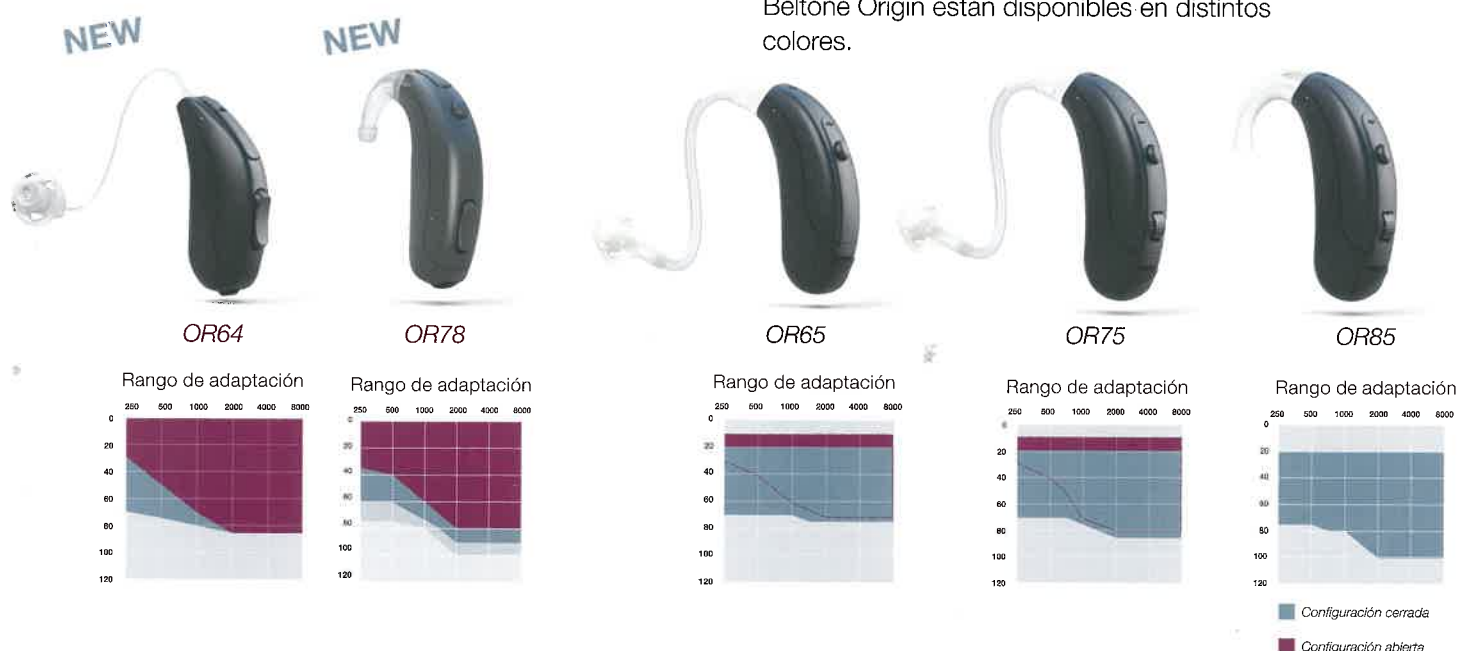

Fabricación a medida

El legado Beltone no es sólo tecnología avanzada. También incluye productos personalizados finamente elaborados por profesionales cualificados.

Cada instrumento se moldea específicamente para adaptarse a los oídos de los usuarios y ofrecer una experiencia auditiva verdaderamente personalizada y cómoda.

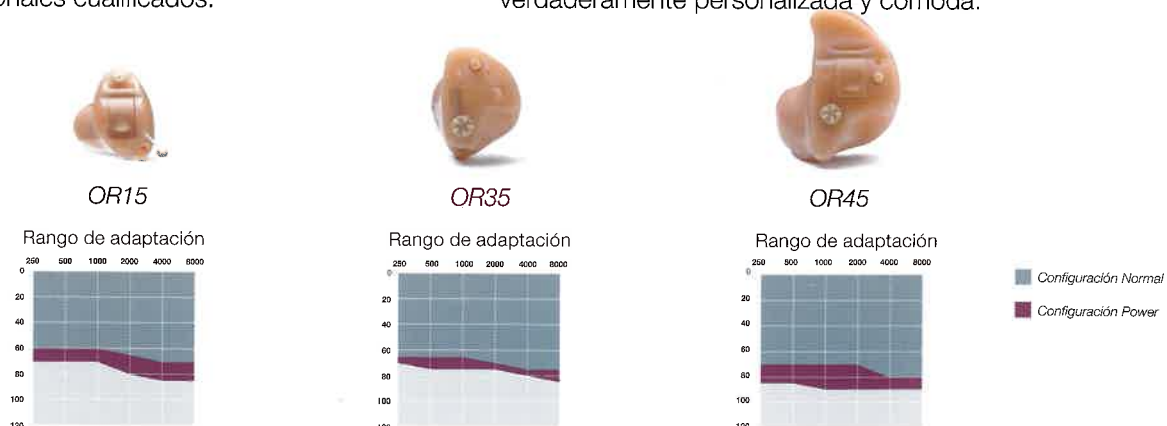

Comparación de características

	Origin 3	Origin 2	Origin 1
Restauración de la audición			
Canales WDRC curvilíneos	6	4	4
Controles	6	3	3
Programas ambientales	2	2	1
Inteligibilidad del habla			
Localizador del habla	Básico	No	No
Direccionalidad adaptativa	Direccionalidad adaptativa 3 puntos	Direccionalidad adaptativa 3 puntos	No
Omnidireccional	Sí	Sí	Sí
Detección telefónica automática	Sí	Sí	No
Comodidad de audición			
Gestor de feedback	Supresor del feedback (2 opciones)	AFC (2 opciones)	AFC (2 opciones)
Reducción de ruidos	SPD extra (2 opciones)	SPD extra (2 opciones)	No
Expansión	Sí activado/desactivado	Sí activado/desactivado	No
Facilidad de uso			
Registro de datos	Sí	Sí	Sí
Abierto	Sí	Sí	No
Ajuste in-situ	Sí	Sí	Sí
Diseño y funcionalidad			
Hardware	Más modelos 15, 35, 45 (HS y FS) 64, 65, 75, 78, 85	Menos modelos 15, 35, 45 (HS y FS) 75, 85	Algunos modelos 15,35,45 (HS y FS) 75 (cerrado), 85
Durabilidad	HPF ⁸⁰ NanoBlock	HPF ⁸⁰ NanoBlock	HPF ⁸⁰ NanoBlock

Beltone, ayudamos al mundo a oír mejor

Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un amigo a disfrutar más de la vida.

Desde 1940, hemos ofrecido conocimiento, herramientas, servicios y formación a los profesionales al cuidado de las personas con problemas auditivos. Beltone pone una audición de calidad al alcance de más personas. Para ello, desarrollamos soluciones de audición técnicamente óptimas sin dejar de centrarnos en las necesidades individuales. Tenemos la firme convicción de que no se le debería negar a ninguna persona la posibilidad de mejorar su vida a través de una mejor audición.

Fabricante

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: + 45 45 75 11 11
Fax: + 45 45 75 11 19
www.beltone.es

 **Beltone**
Helping the world hear better